

LabSolutions™ DB/CS

安装维护说明书

UV-Vis 附册

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

前言

请在使用本产品前仔细阅读本说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本说明书记载了本产品的使用方法及选配件等信息。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书转交给后续用户。
- 如果本说明书或本产品警告标签丢失或损坏，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作本产品，请委托您所在区域内的岛津分公司进行安装、调试，修理或搬动仪器后的重新安装。

声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。
Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。
在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《LabSolutions DB/CS 安装维护说明书 UV-Vis附册》（207-90398）（修订版C 2021年5月）的译文。

使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

标记	说明
■ 注释	正确使用本产品的附加说明。
▶▶ 参考	标注参考页数。

鼠标和窗口操作

标记	说明
单击	指向对象，用鼠标左键点击一次的动作。
右击	指向对象，用鼠标右键点击一次的动作。
双击	指向对象，用鼠标左键点击两次的动作。
[] 内的文字	窗口上的按钮名称和窗口名称。 示例：单击 [确定]。
“ ” 内的文字	输入的数值、文字、键盘的名称。 示例：按住“Ctrl”键的同时按“N”键。

本书使用指南

UV-Vis机型使用LabSolutions UV-Vis和LabSolutions Manager构建LabSolutions系统。包括本书在内，使用说明书的组成如下表所示。

请根据需要参考各使用说明书的详细内容，具体如下：

使用说明书	内容
LabSolutions Manager DB 安装维护说明书 或 LabSolutions Manager CS 安装维护说明书	对LabSolutions系统的安装方法、故障排除和系统配置进行说明。
LabSolutions DB/CS 安装维护说明书 UV-Vis附册（本书）	对UV-Vis机型专用的安装方法、故障排除和系统配置进行说明。
LabSolutions Manager DB管理说明书 或 LabSolutions Manager CS管理说明书	对LabSolutions系统的管理功能使用方法进行说明。
LabSolutions DB/CS 管理说明书 UV-Vis附册	对UV-Vis机型专用的管理功能使用方法进行说明。
LabSolutions UV-Vis 基本操作说明书	对LabSolutions UV-Vis的基本操作方法进行详细说明。

关于LabSolutions各命令的详细说明和使用方法，请参考帮助文件。

保修

本产品的保修内容如下：

1. 保修期

请咨询您所在区域内的岛津分公司。

2. 保修内容

对保修期内因本公司原因造成的故障将免费维修或免费更换部件。但对计算机及其外围设备、部件等短寿命产品可能无法提供同一型号的产品。

3. 责任范围

(1) 任何情况下本公司均不对用户的误工费、间接性损害和衍生性损害负任何责任。也不对因第三方向用户提起的损坏赔偿负任何责任。

(2) 任何情况下本产品的最高赔偿金额均以出厂价格或销售价格为限。

4. 责任免除

下列故障不属于保修范围：

(1) 操作不当。

(2) 非本公司或本公司指定的其他公司对本产品进行的维修或改装。

(3) 与非本公司指定的硬件或软件一起使用。

(4) 因计算机病毒造成的本产品故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(5) 因停电或电压突然降低等电源故障引发的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(6) 错误关机造成的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(7) 非产品本身原因造成的故障。

(8) 因在高温高湿、腐蚀性气体或震动等恶劣环境中使用本产品而造成的故障。

(9) 因火灾、地震或其他自然灾害、放射性物质和有害物质的污染，以及战争、暴乱和犯罪等不可抗力事故造成的故障。

(10) 安装后用户自行移动或运输产品时造成的故障。

(11) 消耗品或等同于消耗品的部件（CD-ROM等）。

* 如果产品附带保修单或单独签署了包括保修事项在内的合同，则应遵守该文件记载的保修内容。

软件使用协议

本软件使用协议（以下称为“本协议”）是用户和株式会社岛津制作所（以下称为“我公司”）之间所达成的协议。

在使用我公司的软件（以下称为“本软件”）、附带的手册等有关资料以及电子文件等（以下合并称为“本软件产品”）之前，请充分阅读本协议的各条款。在安装、复制或者使用本软件时，默认为用户同意本协议的各条款。如果不同意本协议的各条款，则本软件产品的使用不被认可。

1. 权利归属

本软件产品的著作权等知识产权，属我公司或者另外指定的第三方所有。

2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可用户对本软件拥有非垄断性使用，但不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件产品使用权是指只授予用户一台电脑对本软件产品的使用权。

3. 使用限制

(1) 用户除了备份的目的以外，无论在任何情况下都不能对本软件产品的全部或者是一部分进行复制、复写，并不能对本软件产品进行修改、追加等改变。

(2) 不论有偿或无偿，用户均无权对本软件产品及其复制品的全部或者是一部分，向第三方出售、分发、出借、转让、或者是再使用。

(3) 用户不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编。

4. 保证范围

(1) 本软件的光盘或者手册等关联资料，如果是由于我公司的责任造成物理上的不良（光盘不良、错页、缺货），用户在本软件产品的交付日开始12个月以内发现，并与我公司联系的情况下，我公司将无偿更换。

(2) 我公司将向用户提供为了修改本软件的错误、程序缺陷等而编制的修改软件、或修改程序（以下称为“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。关于提供修改程序或者修改信息的必要性、提供方法以及时期等，由我公司进行判断决定。

关于修改程序的导入或者是否按照修改信息进行处理，则由用户判断与实施。

(3) 我公司在上述各项规定以外，对于本软件产品不做任何保证。

5. 责任限制

(1) 我公司无论在什么情况下，对用户损失利益、特殊的、意外的事情所发生的损害以及由第三方提出索赔带来的损失，不负任何责任。

(2) 我公司需对用户承担损害赔偿任时，无论在什么情况下，最高不超过用户实际支付本软件产品的购买金额。

6. 解约

(1) 如果用户违反本协议规定的任何一项条款时，我公司都将立即解除本协议。

(2) 本协议结束时，按照本协议规定，用户的权利也同时结束。用户在本协议结束后应及时地将本软件产品以及其复制品全部销毁。

7. 其他

(1) 本协议依据日本国法令制定。

(2) 有关本协议的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

售后服务及部件供货期

■ 售后服务

如果本产品无法正常运行，请参考《LabSolutions UV-Vis 基本操作说明书》和《LabSolutions Manager DB (CS) 管理说明书》，进行检查和处理。

如果未能排除故障或发生其他故障，请与您所在区域内的岛津分公司联系。

■ 部件供货期

本产品部件的供货期为产品停产后七年，之后可能无法提供，敬请谅解。

非本公司生产部件的供货期请参考供货方规定。

目录

前言

使用说明书中的标记	ii
鼠标和窗口操作	ii
本书使用指南	ii
保修	iii
软件使用协议	iv
售后服务及部件供货期	v

1 | 安装

1.1 安装软件	3
1.1.1 安装LabSolutions Manager	3
1.1.2 安装LabSolutions UV-Vis	4
1.1.3 安装UVProbe文件查看器	8
1.1.4 安装USB虚拟COM端口驱动程序	9
1.2 创建数据库	11
1.3 与服务器的连接设置	11
1.4 添加数据采集控制器	11
1.5 登录样品文件	12
1.6 卸载	13

2 | 硬件连接

2.1 连接UV仪器与计算机	14
----------------------	----

3 | 系统配置

3.1 UV系统配置	15
3.1.1 登录仪器	15
3.1.2 编辑计算机和仪器信息	17
3.1.3 连接电缆	18
3.1.4 选择连接仪器	19

4 | 系统维护

4.1 UV 仪器的初始化动作	23
-----------------------	----

1 安装

本章讲述软件的安装步骤。

本系统包括在本地计算机中创建存储数据库的数据库版（独立结构）和在网络中创建数据库的客户服务器版（客户端/服务器结构）。

■ 安装数据库版

请按照以下步骤，安装UV机型专用的数据库版（以下简称为LabSolutions DB（UV-Vis））。

- 步骤1. 安装LabSolutions Manager（→1.1.1）
- 步骤2. 安装LabSolutions UV-Vis（→1.1.2）
- 步骤3. 创建数据库（→1.2）
- 步骤4. 登录样品文件（→1.5）

■ 安装客户服务器版

客户端/服务器结构的各计算机如下所示。按照LabSolutions服务器、数据采集控制器、客户端的顺序进行安装。

▶▶ 参考 关于系统结构的详细内容，请参考《LabSolutions Manager CS 安装维护说明书》。

- LabSolutions服务器： 对系统管理信息和分析数据等项目的信息进行统一管理。
- 数据采集控制器： 可连接分析仪器，进行仪器控制或分析处理。
- 客户端： 执行数据分析、系统管理等处理。无法控制UV仪器。

LabSolutions服务器

按照以下步骤安装LabSolutions服务器及LabSolutions服务器（终端服务）。

▶▶ 参考 关于各步骤的详细操作，请参考《LabSolutions Manager CS安装维护说明书》。

- 步骤1. 安装LabSolutions服务器
- 步骤2. 安装LabSolutions UV-Vis（→1.1.2）
- 步骤3. 创建数据库
- 步骤4. 与服务器的连接设置
- 步骤5. 添加数据采集控制器

- ▼ 注释
- 对LabSolutions服务器执行上述“步骤2”后，UV-Vis仪器将变为可用。
 - 请在完成数据采集控制器的安装作业后，再执行“步骤5. 添加数据采集控制器”。

数据采集控制器

按照以下步骤安装UV机型专用的数据采集控制器。

- 步骤1. 安装LabSolutions Manager（数据采集控制器）（→1.1.1）
- 步骤2. 安装LabSolutions UV-Vis（→1.1.2）
- 步骤3. 登录样品文件（→1.5）

客户端

按照以下步骤安装客户端。

在使用其他机型完成安装的客户端内添加UV机型时，请仅实施“步骤2”。

步骤1. 安装LabSolutions Manager（客户端）（→1.1.1）

步骤2. 安装LabSolutions UV-Vis（→1.1.2）

步骤3. 与服务器的连接设置（→1.3）

1.1 安装软件

本节对软件的安装操作进行说明。

本系统由LabSolutions Manager和LabSolutions UV-Vis组成，要求根据系统结构，安装两种软件。

在安装软件前，请检查以下各项。

- 注释
- 安装程序将系统文件复制到以下文件夹。
请勿对此类文件进行操作，否则将导致本软件无法运行。
C:\LabSolutions\System
(C:\LabSolutions是安装文件夹)
C:\Program Files\LabSolutions\UVVis
(C:是Windows系统的安装驱动器盘符)
 - 安装程序将识别操作系统使用的语言并开始安装。[控制面板]中[区域和语言]及[日期和时间]的设置需与安装语言匹配。

1.1.1 安装LabSolutions Manager

安装LabSolutions Manager。

本软件包括在本地计算机中创建存储数据库的数据库版（独立结构）和在网络中创建数据库的客户服务器版。

请根据系统结构，安装对应的LabSolutions Manager。

- 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的《安装维护说明书》。

1.1.2 安装LabSolutions UV-Vis

安装LabSolutions UV-Vis。

1

将扩展程序的安装盘插入光盘驱动器。

▼ 注释 下例中的驱动器盘符为E。对于“e:\”部分，请设置使用的驱动器盘符。

2


显示[自动播放]窗口后，单击[运行SetupLauncher.exe]，进入步骤5。如果未启动安装程序，则进入步骤3。

3

单击开始菜单。

4


输入“e:\SetupLauncher.exe”，并按下[Enter]键。

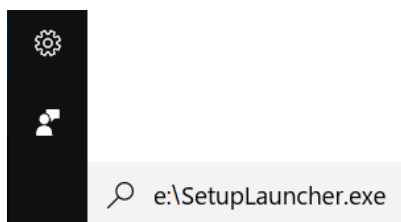**5**


在安装程序工作站的窗口单击[LabSolutions UV-Vis]的[安装]。




- 6 在 [用户帐户控制] 窗口单击 [是]。

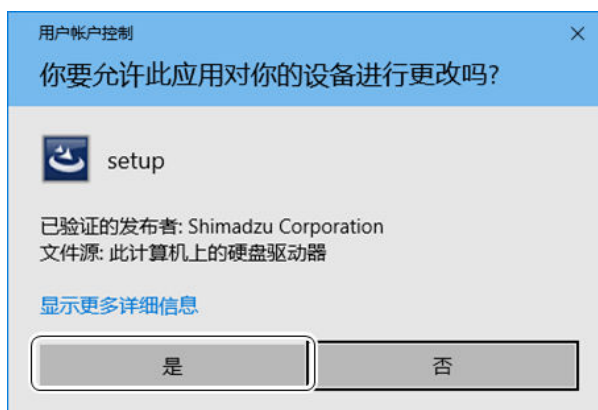

- 7 输入密码。
密码记载于《LabSolutions DB/CS UV-Vis 使用前的注意事项》。
如果密码错误，将无法进入下一步。

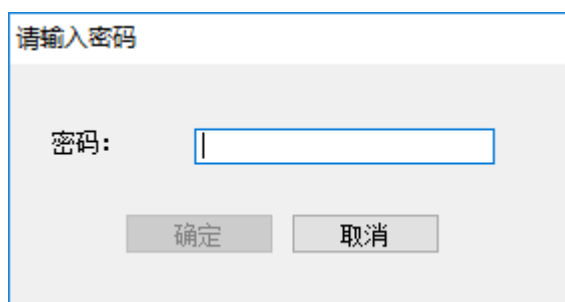


- 8 阅读许可证信息后，单击 [下一步]。

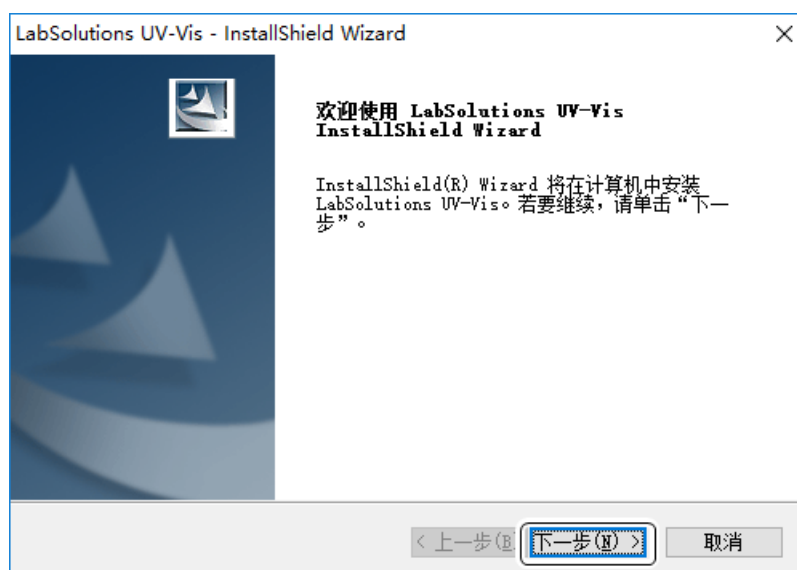


9

输入 [用户名]、[公司名称] 后，单击 [下一步]。

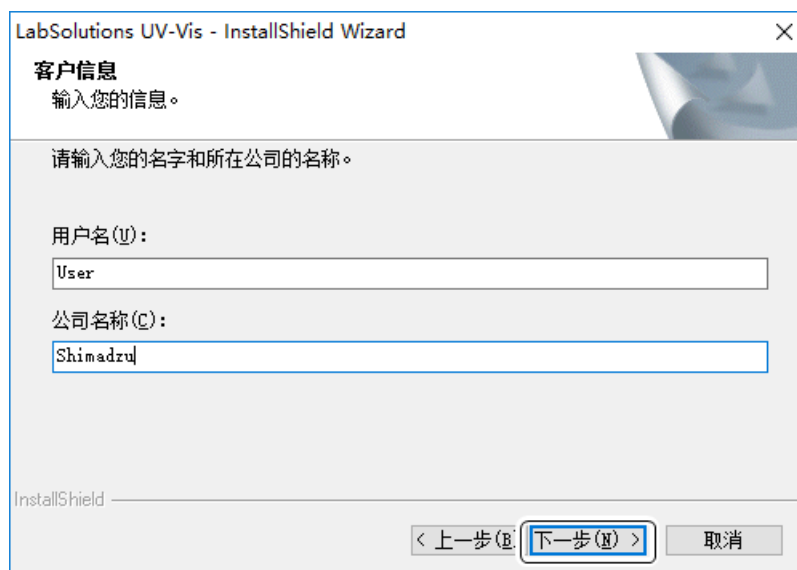


10

确认输入无误后，单击 [下一步]。

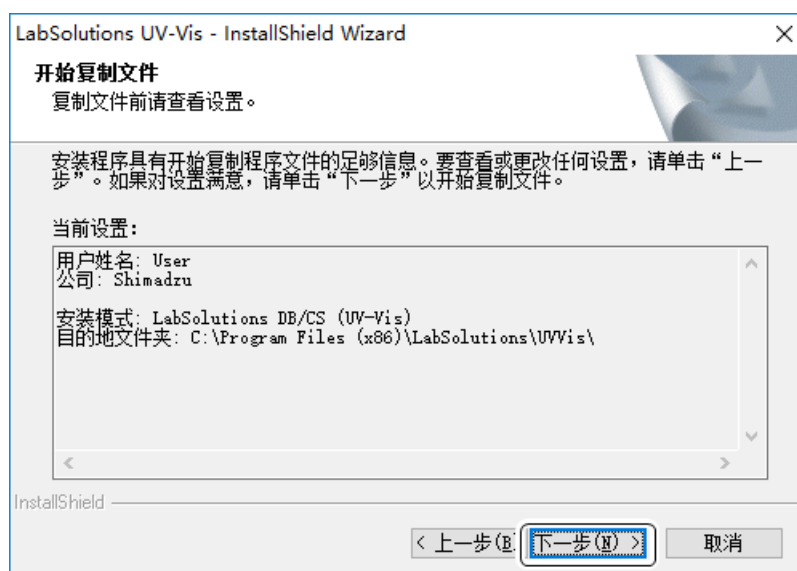

11

安装完毕后，选择 [是，立即重新启动计算机。] 后，单击 [完成]。

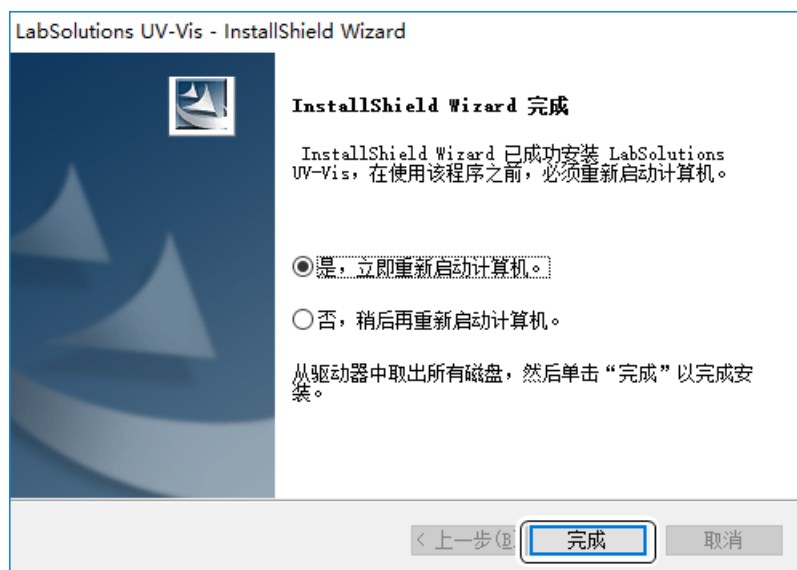

至此，LabSolutions UV-Vis 安装完毕。

1.1.3 安装UVProbe文件查看器

安装UVProbe文件查看器。

1

在安装程序工作站的窗口单击 [UVProbe文件查看器] 的 [安装]。

▼ 注释 需要查看由UVProbe创建的数据文件时，安装本应用程序。

**2**

按照安装向导进行安装。

1.1.4 安装USB虚拟COM端口驱动程序

安装USB虚拟COM端口驱动程序。

1

在安装程序工作站的窗口单击[USB虚拟COM端口驱动程序]的[安装]。

▼ 注释 如果使用UV-1900系列的仪器，则不需要此操作。
此时请安装UV-1900系列附带的专用驱动程序。

▼ 注释 如果使用UV-1800系列、UV-2600系列和UV-2700系列的仪器，仅在仪器为以下固件版本时需要进行安装：

- UV-1800系列 Ver.1.22以前（1.00～1.22）
- UV-2600系列 Ver.1.12以前（1.00～1.12）
- UV-2700系列 Ver.1.12以前（1.00～1.12）

仪器附带的检查证书中记载的“FW Ver.”或“ROM Ver.”为交货时的固件版本。



2

按照安装向导进行安装。

▼ 注释 显示以下窗口时，请单击 [安装] 。



1.2 创建数据库

关于数据库的创建方法，请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的《安装维护说明书》。

1.3 与服务器的连接设置

在客户端/服务器结构中，要求使用已安装客户端和LabSolutions服务器的计算机进行数据库的连接设置。

关于设置方法，请参考《LabSolutions Manager CS 安装维护说明书》。

1.4 添加数据采集控制器

关于数据采集控制器（仅适用客户服务器版）的添加和更改方法，请参考《LabSolutions Manager CS 安装维护说明书》。

1.5 登录样品文件

本软件自带多个样品数据文件。本节对样品文件的登录方法进行说明。

1


启动下例所示文件夹内的“LSSCreateOQProject.exe”。

安装文件夹为“C:\Program Files”时：

C:\Program Files\Labsolutions\LSSCreateOQProject.exe


2

输入拥有[项目管理]权限的[用户ID]和[密码]，单击[确定]。

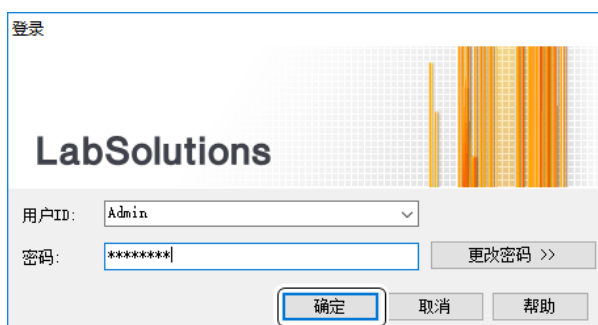

3

选择[样品项目]，[类型]选择[UV-Vis]后，单击[创建]。
允许更改项目名称。

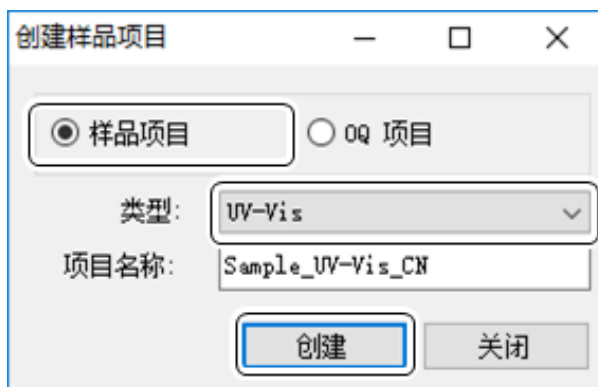

创建已登录样品文件的项目。

1.6 卸载

本节对软件的卸载操作进行说明。

 **注释** 建议在卸载本软件前备份驱动器数据。

1

单击控制面板内的 [程序和功能] 。

2

卸载 [LabSolutions UV-Vis] 。

- 1 选择 [LabSolutions UV-Vis] ，单击 [卸载] 。
开始卸载LabSolutions UV-Vis。
完成卸载后，将显示 [卸载完成] 窗口。

- 2 单击 [完成] 。

3

卸载 [LabSolutions扩展程序] 。

- 1 选择 [LabSolutions扩展程序] ，单击 [卸载] 。
开始卸载LabSolutions扩展程序。
完成卸载后，将显示 [卸载完成] 窗口。

- 2 单击 [完成] 。

4

卸载 [SkyPDF Server MT 20xx] 。

选择 [SkyPDF Server MT 20xx] ，单击 [卸载] 。

5

卸载 [LabSolutions Manager] 。

- 1 选择 [LabSolutions Manager] ，单击 [卸载] 。
开始卸载LabSolutions Manager。
完成卸载后，将显示 [卸载完成] 窗口。

- 2 单击 [完成] 。
完成卸载。

2 硬件连接

本章对安装本软件的计算机与UV仪器的连接及通讯设置进行说明。

2.1 连接 UV 仪器与计算机

对于UV-Vis机型，1台计算机连接1台UV仪器。

UV机型不同，与计算机的连接方式也不同。

3 系统配置

3.1 UV 系统配置

3.1.1 登录仪器

使用客户端 / 服务器结构时，完成本软件的安装和数据采集控制器的添加后，需登录 LabSolutions 系统所使用的 UV 仪器。对于数据库版，安装本软件即可自动登录 UV 仪器。对于 UV-Vis 机型，1 台计算机连接 1 台 UV 仪器。

1


双击  (LabSolutions)，输入用户 ID 和密码。

显示 [LabSolutions 主项目] 窗口。

显示 [选择项目] 窗口时，在列表内选择项目后单击 [确定]。

2

单击 [管理工具]。

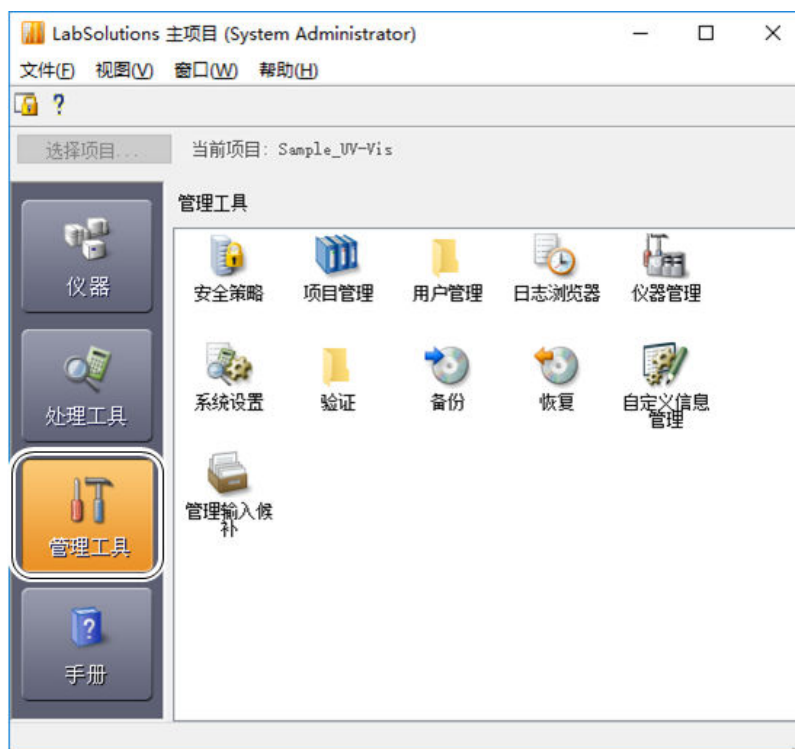

3

双击 [仪器管理]。

显示 [仪器管理] 窗口。


使用已登录的仪器时，无需进行仪器登录操作。

仅在未设置仪器时，需登录仪器。

如果无需登录仪器，则执行“3.1.4 选择连接仪器” P.19。

4

使用客户服务器版时，在〔数据采集控制器列表〕内选择与仪器相连的计算机。

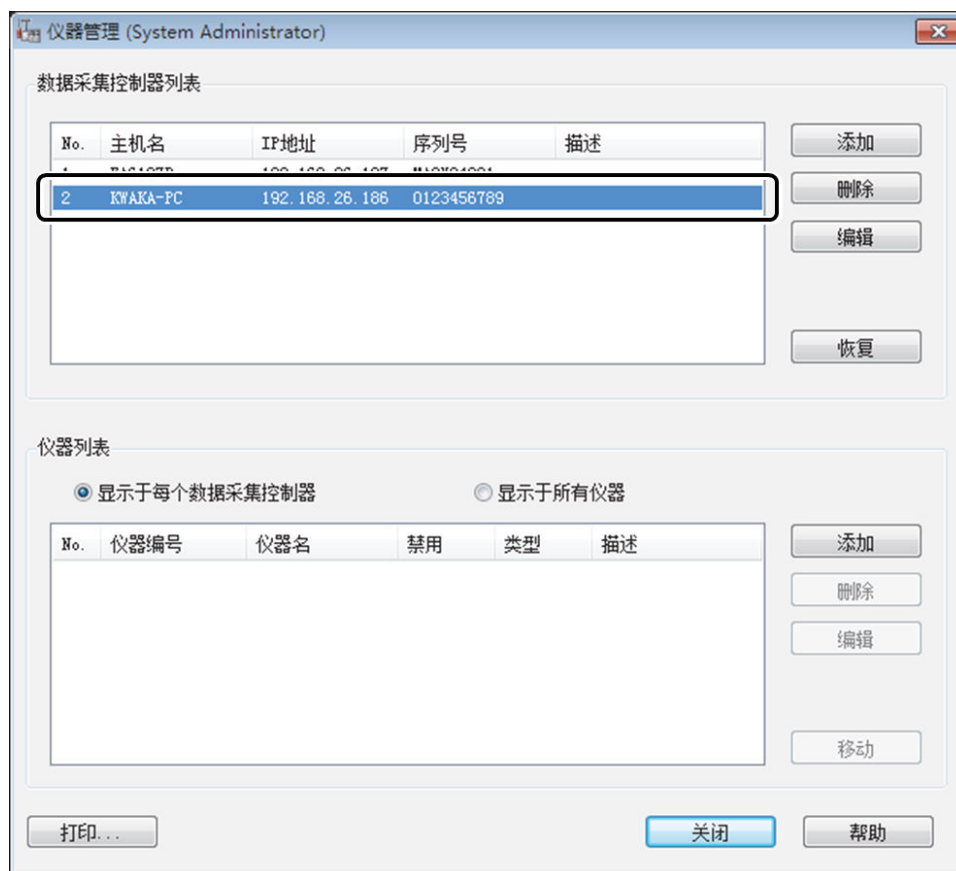

5


单击〔仪器列表〕右侧的〔添加〕。
显示〔添加仪器〕窗口。

6

输入 [仪器名]，从 [类型] 列表中选择 [UV-Vis] 后，单击 [确定]。
将仪器添加至 [仪器列表]。仅允许登录1台仪器。



提示 在仪器名称中输入系统中使用的名称、用于与其他仪器区分的管理编号等信息。没有特定名称时，输入仪器的型号。

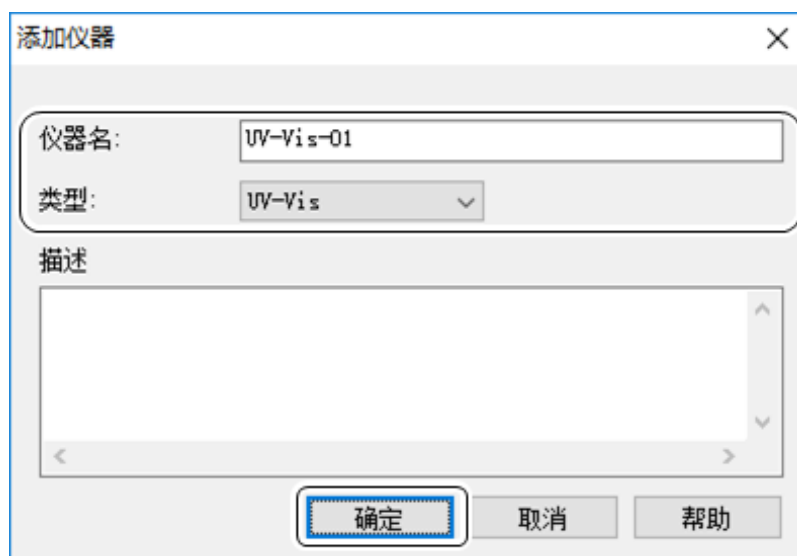

添加仪器对话框的截图。对话框标题为“添加仪器”，右上角有关闭按钮。内部包含两个输入区域：上方区域包含“仪器名”文本框（已输入“UV-Vis-01”）和“类型”下拉菜单（已选择“UV-Vis”）；下方区域包含一个“描述”文本框。底部有三个按钮：“确定”（被蓝色边框高亮）、“取消”和“帮助”。

7

设置完毕后，单击 [仪器管理] 窗口的 [关闭]。

8

选择 [LabSolutions主项目] 窗口的 [仪器] 标签。
在 [类型] 中选择 [UV] 后，将显示已添加的仪器。

3

3.1.2 编辑计算机和仪器信息

安装时获取系统信息后将自动设置计算机信息。此外，数据库版也在安装时自动设置仪器信息。
LabSolutions系统支持在安装后编辑此类信息。

▶▶ **参考** 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“3.1 设置仪器信息”。

3.1.3 连接电缆

用通信电缆连接分光光度计和PC。

如果分光光度计使用USB电缆，请按以下步骤连接：

1

确认已完成“1 安装”P.1的作业，并已打开计算机电源。

2

确认分光光度计的电源状态为“OFF”。

3

将USB电缆插入分光光度计左侧的计算机专用USB端口。

▶▶ 参考 关于端口位置等详细内容，请参考分光光度计的使用说明书。

4

将USB电缆插入计算机的连接端口。

5

打开分光光度计的电源。

计算机识别分光光度计后，屏幕右下将显示USB连接COM端口编号。


▶▶ 参考 关于电源（ON/OFF）的详细内容，请参考分光光度计的使用说明书。

6

确认USB连接COM端口编号。

设置UV仪器的通信COM端口时需使用端口编号。

如需重新确认编号，可右击屏幕右下的[安全删除硬件并弹出媒体]图标，查看当前设置的COM端口编号。

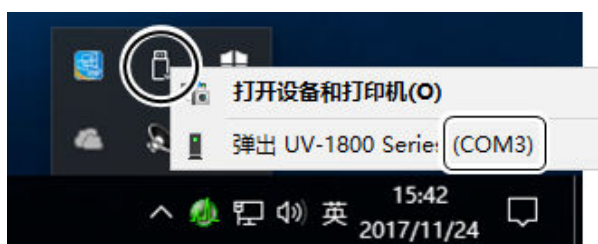


▼ 注释 重新确认COM端口编号时，请避免因误操作导致COM端口弹出。

3.1.4 选择连接仪器

进行连接仪器的设置。

1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [仪器] 标签中双击 [UV-Vis仪器] 图标。

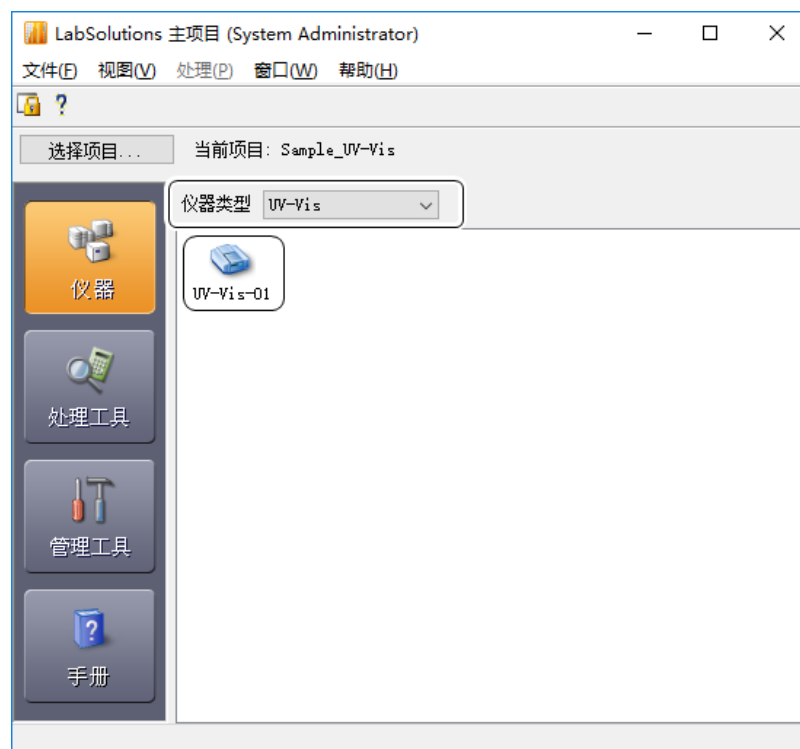

启动LabSolutions UV-Vis启动窗口。

3


2

单击 [系统配置]。



3


单击 [仪器]。

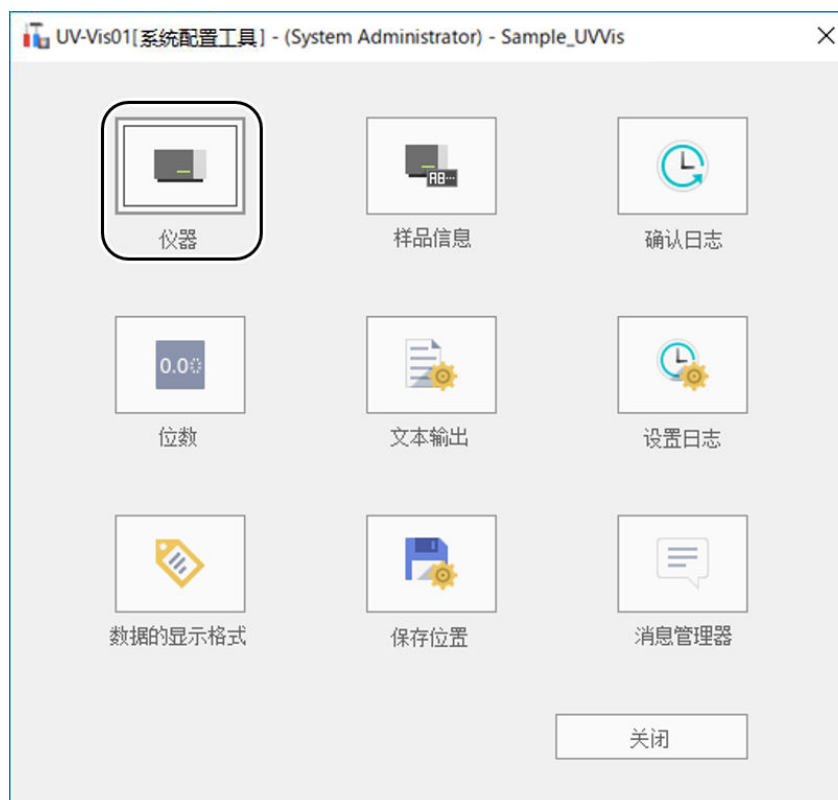

4

选择 [仪器类型] 。

选择待连接的紫外可见分光光度计的机型。本例中选择 [UV-2600] 。

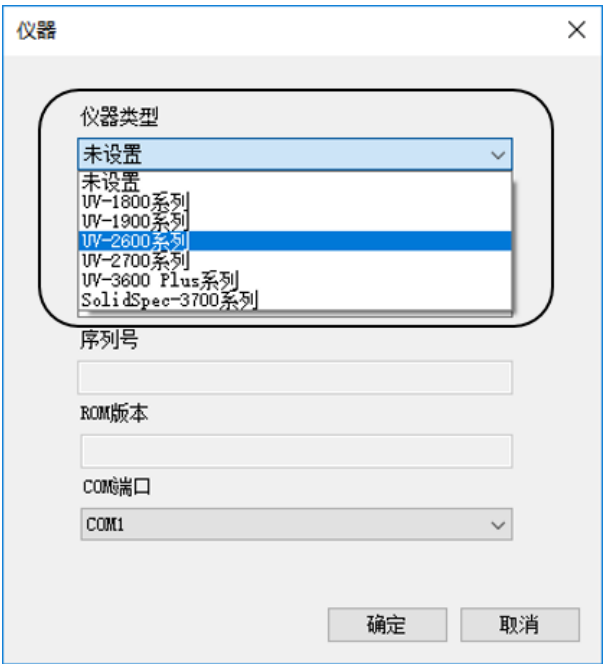


5

输入 [型号]、[序列号] 和 [ROM版本] 。

输入待连接的紫外可见分光光度计的仪器名称和型号。本例中型号输入 “A1234567” 。

LabSolutions DB/CS的系统中无需输入仪器名称。将直接显示 “3.1.1 登录仪器” 中设置的仪器名称。


 注释 对于可自动从仪器获得 [序列号] 和 [ROM版本] 的机型，无需输入。

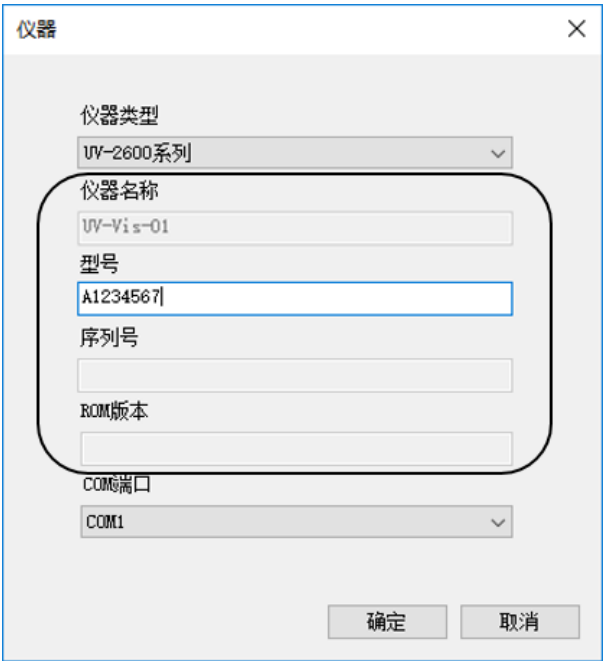

6

选择紫外可见分光光度计连接的[COM端口]后，单击[确定]。

对于使用USB电缆的仪器选择“3.1.4 选择连接仪器”P.19中已确认的COM端口编号。

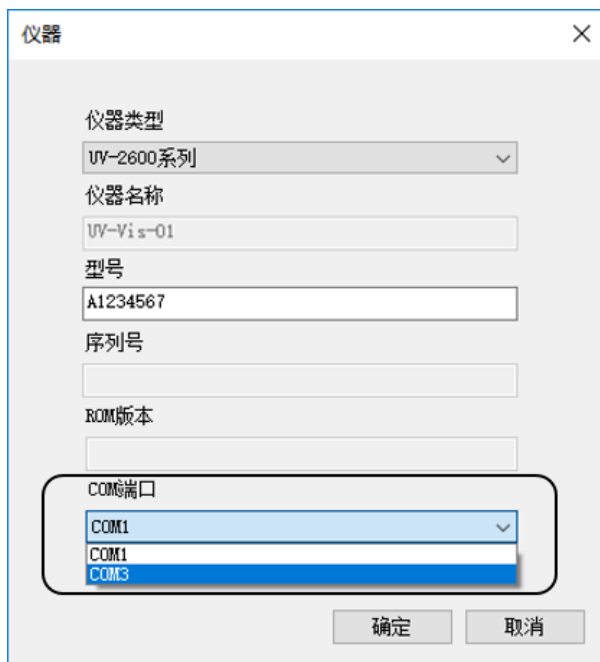

The image shows a software dialog box titled "仪器" (Instrument) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and a dropdown menu:

- 仪器类型** (Instrument Type): A dropdown menu currently showing "UV-2600系列" (UV-2600 Series).
- 仪器名称** (Instrument Name): A text input field containing "UV-Vis-01".
- 型号** (Model): A text input field containing "A1234567".
- 序列号** (Serial Number): An empty text input field.
- ROM版本** (ROM Version): An empty text input field.
- COM端口** (COM Port): A dropdown menu with a list of options: "COM1", "COM1", and "COM3". The "COM3" option is currently selected and highlighted in blue.

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

4 系统维护

4.1 UV 仪器的初始化动作

以测定模式启动LabSolutions UV-Vis，打开UV仪器的电源后，单击仪器控制按钮栏的〔连接〕。仪器将进行初始化，并打开初始化窗口，显示初始化的结果和进度。



UV-2600的初始化窗口

注释 对于独立结构的机型及UV-2600 / UV-2700，打开仪器电源后，即启动初始化设置。

机型不同，初始化的项目也不同。关于各设置项目的详细信息，请参考各仪器的使用说明书。初始化结束后，将在输出窗口的〔仪器履历〕标签内保存结果。结果将显示于日志视图。

空白页