

LabSolutions™ UV-Vis

色彩计算功能说明书

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

前言

请在使用本产品前仔细阅读本说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本说明书记载了本产品的使用方法和选配件等信息。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书转交给后续用户。
- 如果丢失或损坏本说明书，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作，请委托岛津指定服务商进行安装、调试、修理或搬动仪器后的重新安装。

声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- 如果要将数据传输到Excel，需要Microsoft Excel。
本产品中不含Microsoft Excel。请另外准备。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。
Windows及Excel是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。
在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《LabSolutions UV-Vis 色彩计算功能说明书》（207-90429）（修订版B 2020年4月）的译文。

使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

标记	说明
 注释	正确使用本产品的附加说明。
 提示	有助于操作的信息。
 参考	标注参考页数。

鼠标和窗口操作

标记	说明
单击	指向对象，用鼠标左键点击一次的动作。
右击	指向对象，用鼠标右键点击一次的动作。
双击	指向对象，用鼠标左键点击两次的动作。
拖动	指向对象，按住鼠标的左键移动鼠标指针的动作。
拖放	拖动至目的位置，松开鼠标左键的动作。
[] 内的文字	窗口上的按钮名称和窗口名称。 示例:单击 [确定]。
“ ” 内的文字	输入的数值、文字、键盘的名称。 示例:按住“Ctrl”键的同时按“N”键。

本书的使用指南

包括本书在内，LabSolutions UV-Vis色彩计算（以下简称色彩计算）说明书的构成如下。
使用时请参考各说明书。

文档名称	文档编号	说明
LabSolutions UV-Vis 色彩计算安装步骤	207-90428	对色彩计算程序的安装方法和系统配置进行说明。
LabSolutions UV-Vis 色彩计算功能说明书 (本书)	207-90431	对色彩计算的基本操作方法进行详细说明。

本说明书的编写对象为使用LabSolutions UV-Vis进行色彩值计算的用户，主要介绍色彩值计算的基本功能及其操作方法。有关LabSolutions UV-Vis中各命令的详细内容和使用方法，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助或LabSolutions UV-Vis基本操作说明书。

本书的构成如下：

构成	内容
第1章 功能的概述	介绍LabSolutions UV-Vis色彩值计算的概述及可使用的评价项目。
第2章 评价功能的操作方法	介绍色彩值计算的设置及操作方法。

虽然本书引用常用示例进行说明，但有时未必与用户的实际情况一致。此时，请根据本书的示例进行操作，理解有关操作步骤的基本思路及基本操作。

建议您按该方法进行试操作，以便熟悉软件的操作。

另外，有关上述章节中未列举项目和窗口的说明，请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

保修

本产品的保修内容如下：

1. 保修期

请咨询您所在区域内的岛津分公司。

2. 保修内容

对保修期内因本公司原因造成的故障将免费维修或免费更换部件。但对计算机及其外围设备、部件等短寿命产品可能无法提供同一型号的产品。

3. 责任范围

(1) 任何情况下本公司均不对用户的误工费、间接性损害和衍生性损害负任何责任。也不对因第三方向用户提起的损坏赔偿负任何责任。

(2) 任何情况下本产品的最高赔偿金额均以出厂价格或销售价格为限。

4. 责任免除

下列故障不属于保修范围：

(1) 操作不当。

(2) 非本公司或本公司指定的其他公司对本产品进行的维修或改装。

(3) 与非本公司指定的硬件或软件一起使用。

(4) 因计算机病毒造成的本产品故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(5) 因停电或电压突然降低等电源故障引发的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(6) 错误关机造成的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(7) 非产品本身原因造成的故障。

(8) 因在高温高湿、腐蚀性气体或震动等恶劣环境中使用本产品而造成的故障。

(9) 因火灾、地震或其他自然灾害、放射性物质和有害物质的污染，以及战争、暴乱和犯罪等不可抗力事故造成的故障。

(10) 安装后用户自行移动或运输产品时造成的故障。

(11) 消耗品或等同于消耗品的部件（CD-ROM等）。

* 如果产品附带保修单或单独签署了包括保修事项在内的合同，则应遵守该文件记载的保修内容。

软件使用协议

本软件使用协议（以下称为“本协议”）是用户和株式会社岛津制作所（以下称为“我公司”）之间所达成的协议。

在使用我公司的软件（以下称为“本软件”）、附带的手册等有关资料以及电子文件等（以下合并称为“本软件产品”）之前，请充分阅读本协议的各条款。在安装、复制或者使用本软件时，默认为用户同意本协议的各条款。如果不同意本协议的各条款，则本软件产品的使用不被认可。

1. 权利归属

本软件产品的著作权等知识产权，属我公司或者另外指定的第三方所有。

2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可用户对本软件拥有非垄断性使用，但不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件产品使用权是指只授予用户一台电脑对本软件产品的使用权。

3. 使用限制

(1) 用户除了备份的目的以外，无论在任何情况下都不能对本软件产品的全部或者是一部分进行复制、复写，并不能对本软件产品进行修改、追加等改变。

(2) 不论有偿或无偿，用户均无权对本软件产品及其复制品的全部或者是一部分，向第三方出售、分发、出借、转让、或者是再使用。

(3) 用户不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编。

4. 保证范围

(1) 本软件的光盘或者手册等关联资料，如果是由于我公司的责任造成物理上的不良（光盘不良、错页、缺货），用户在本软件产品的交付日开始12个月以内发现，并与我公司联系的情况下，我公司将无偿更换。

(2) 我公司将向用户提供为了修改本软件的错误、程序缺陷等而编制的修改软件、或修改程序（以下称为“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。关于提供修改程序或者修改信息的必要性、提供方法以及时期等，由我公司进行判断决定。

关于修改程序的导入或者是否按照修改信息进行处理，则由用户判断与实施。

(3) 我公司在上述各项规定以外，对于本软件产品不做任何保证。

5. 责任限制

(1) 我公司无论在什么情况下，对用户损失利益、特殊的、意外的事情所发生的损害以及由第三方提出索赔带来的损失，不负任何责任。

(2) 我公司需对用户承担损害赔偿责任人时，无论在什么情况下，最高不超过用户实际支付本软件产品的购买金额。

6. 解约

(1) 如果用户违反本协议规定的任何一项条款时，我公司都将立即解除本协议。

(2) 本协议结束时，按照本协议规定，用户的权利也同时结束。用户在本协议结束后应及时地将本软件产品以及其复制品全部销毁。

7. 其他

(1) 本协议依据日本国法令制定。

(2) 有关本协议的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

使用注意事项

■ 最新信息

单击  (开始) 打开 [所有程序] - [Shimadzu] - [LabSolutions UV-Vis] - [发布说明]，在显示的发布说明中记载有LabSolutions UV-Vis的最新信息。操作之前请务必阅读。

■ 屏幕保护功能

在时间程序测定及连续测定等测定中如启用屏幕保护功能，可能导致软件停止运行。请将操作系统设置为不使用屏幕保护功能。

■ 病毒扫描软件等常驻程序

启动LabSolutions UV-Vis的PC中如已启动病毒扫描软件等，会导致LabSolutions UV-Vis的启动、退出等动作变慢。

使用LabSolutions UV-Vis时，请设置为不启动其他软件。

■ 文字输入

LabSolutions UV-Vis不支持“万国码(unicode)”。

文本请勿输入“万国码(unicode)”。

■ 数值输入

使用LabSolutions UV-Vis输入数值时，必须使用半角数字。

目录

前言

使用说明书中的标记	ii
鼠标和窗口操作	ii
本书的使用指南	iii
保修	iv
软件使用协议	v
使用注意事项	vi

1 功能的概述

1.1 应用	1
1.2 评价项目	2

2 评价功能的操作方法

2.1 画面构成	7
2.1.1 主窗口	7
2.1.2 色度图	8
2.2 色彩值计算的操作步骤	9
2.2.1 评价项目的设置	9
2.2.2 数据的加载	15
2.2.3 数据的保存	16
2.2.4 色度图的打印	17
2.3 应用篇	18
2.3.1 计算色差的方法	18
2.3.2 Excel传输	19

索引	20
----------	----

空白页

下面介绍LabSolutions UV-Vis的光谱测定中色彩值计算的概述及计算项目。

▶▶ 参考 详细信息请参考LabSolutions UV-Vis的基本操作说明书或帮助。

■ 本章中介绍的内容

介绍色彩值计算的计算项目。

1.1 应用

色彩值计算是可以在LabSolutions UV-Vis的光谱测定中使用的评价功能。

加载光谱测定得到的透射率或反射率的光谱数据以计算色彩值。同时，将计算的值绘制为色度图。

1.2 评价项目

下面介绍LabSolutions UV-Vis的色彩值计算中可使用的评价项目。

▶▶ 参考 各项目的详细计算公式请参考LabSolutions UV-Vis的帮助。

■ XYZ色彩空间

表示与XYZ色彩空间中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
λ_g	XYZ色彩空间的重心波长	JIS Z8722-2009
X	XYZ色彩空间的三刺激值	• JIS Z8722-2009 • ASTM E308-15
Y	XYZ色彩空间的三刺激值	• JIS Z8722-2009 • ASTM E308-15
Z	XYZ色彩空间的三刺激值	• JIS Z8722-2009 • ASTM E308-15
x	XYZ色彩空间的色度坐标	• JIS Z8722-2009 • ASTM E308-15
y	XYZ色彩空间的色度坐标	• JIS Z8722-2009 • ASTM E308-15
z	XYZ色彩空间的色度坐标	• JIS Z8722-2009 • ASTM E308-15
λ_d	XYZ色彩空间的主波长	JIS Z8781-3-2013
Pe	XYZ色彩空间的激发纯度	JIS Z8781-3-2013

规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度
ASTM规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度

■ CIELAB 1976 $L^*a^*b^*$ 色彩空间

表示与 $L^*a^*b^*$ 色彩空间中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
L^*	$L^*a^*b^*$ 色彩空间的明度指数	• JIS Z8781-4-2013 • ASTM E308-15
a^*	$L^*a^*b^*$ 色彩空间的色坐标	• JIS Z8781-4-2013 • ASTM E308-15
b^*	$L^*a^*b^*$ 色彩空间的色坐标	• JIS Z8781-4-2013 • ASTM E308-15
C^*_{ab}	$L^*a^*b^*$ 色彩空间的色度成分	• JIS Z8781-4-2013 • ASTM E308-15
h_{ab}	$L^*a^*b^*$ 色彩空间的色相相关值	• JIS Z8781-4-2013 • ASTM E308-15
ΔL^*	$L^*a^*b^*$ 色差的 L^* 明度指数差	JIS Z8781-4-2013
Δa^*	$L^*a^*b^*$ 色差的 a^* 色坐标差	JIS Z8781-4-2013
Δb^*	$L^*a^*b^*$ 色差的 b^* 色坐标差	JIS Z8781-4-2013
ΔC^*_{ab}	$L^*a^*b^*$ 色差的色度成分差	JIS Z8781-4-2013
Δh_{ab}	$L^*a^*b^*$ 色差的色相角成分差	JIS Z8781-4-2013
ΔH^*_{ab}	$L^*a^*b^*$ 色差的色相成分差	JIS Z8781-4-2013
ΔE^*_{ab}	为 $L^*a^*b^*$ 色彩空间中作为坐标间的欧氏距离的两个颜色刺激间的色差	JIS Z8781-4-2013

规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度
ASTM规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度

■ CIE 1976 L*u*v*色彩空间

表示与L*u*v*色彩空间中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
L*	L*u*v*色彩空间的明度指数	• JIS Z8781-5-2013 • ASTM E308-15
u*	L*u*v*色彩空间的色坐标	• JIS Z8781-5-2013 • ASTM E308-15
v*	L*u*v*色彩空间的色坐标	• JIS Z8781-5-2013 • ASTM E308-15
C _{uv} *	L*u*v*色彩空间的色度成分	• JIS Z8781-5-2013 • ASTM E308-15
h _{uv}	L*u*v*色彩空间的色相相关值	• JIS Z8781-5-2013 • ASTM E308-15
ΔL*	L*u*v*色差的明度指数差	JIS Z8781-5-2013
Δu*	L*u*v*色差的色坐标差	JIS Z8781-5-2013
Δv*	L*u*v*色差的色坐标差	JIS Z8781-5-2013
ΔC _{uv} *	L*u*v*色差的色度成分差	JIS Z8781-5-2013
Δh _{uv}	L*u*v*色差的色相角成分差	JIS Z8781-5-2013
ΔH _{uv} *	L*u*v*色差的色相成分差	JIS Z8781-5-2013
ΔE _{uv} *	为L*u*v*色彩空间中作为坐标间的欧氏距离的两个颜色刺激间的色差	JIS Z8781-5-2013

规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度
ASTM规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度

■ 孟塞尔色彩空间

表示与孟塞尔色彩空间中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
V	孟塞尔色彩空间的明度	JIS Z8721
C	孟塞尔色彩空间的彩度	JIS Z8721
H	孟塞尔色彩空间的色相	JIS Z8721

规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	C、D65	2度

■ 条件等色

表示与条件等色中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
M	根据两种不同试验光下测得的三刺激值的色差 (ΔE^*_{ab} 或 ΔE^*_{uv}) 求出的条件等色值	JIS Z8719
规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	A、C、D50、D55、D65、D75、FL2、FL3、FL6、FL7、FL8、FL10、FL11、FL15	2度、10度

■ 黄色度/变黄度

表示与黄色度中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
YI	计算的黄色度	• JIS K7373 • ASTM E313-15
ΔYI	标准样品和测定样品的黄色度差	JIS K7373
规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	C、D65	2度、10度
ASTM规格	C、D65	2度、10度

■ 白色度/颜色系数

表示与白色度测定中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。
使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
W	计算的白色度	JIS Z8715
T_w	计算的色阶	JIS Z8715
规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	D65	2度、10度

■ 色差

表示与色差测定中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。

使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
dE	色差	JIS Z8781-6-2017
规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	D65	2度、10度

■ Hunter Lab色彩空间

表示与Lab色彩空间中使用的各符号对应的内容和可选择的规格。

使用所选规格中规定的计算公式计算各值。

符号	内容	可选择的规格
L	Lab色彩空间的明度指数	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16
a	Lab色彩空间的色坐标	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16
b	Lab色彩空间的色坐标	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16
ΔL	Lab色差的L明度指数差	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16
Δa	Lab色差的a色坐标差	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16
Δb	Lab色差的b色坐标差	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16
ΔEH	为Lab色彩空间中作为坐标间的欧氏距离的两个颜色刺激间的色差	• JIS Z8730-1995 • ASTM D2244-16

规格	可选择的比色光源	可选择的观察视野
JIS规格	C	2度
ASTM规格	A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11	2度、10度

2 评价功能的操作方法

下面介绍色彩值计算的操作步骤。


■ 本章中介绍的内容

介绍色彩值计算的设置画面和光谱的加载。

2

2.1 画面构成

2.1.1 主窗口

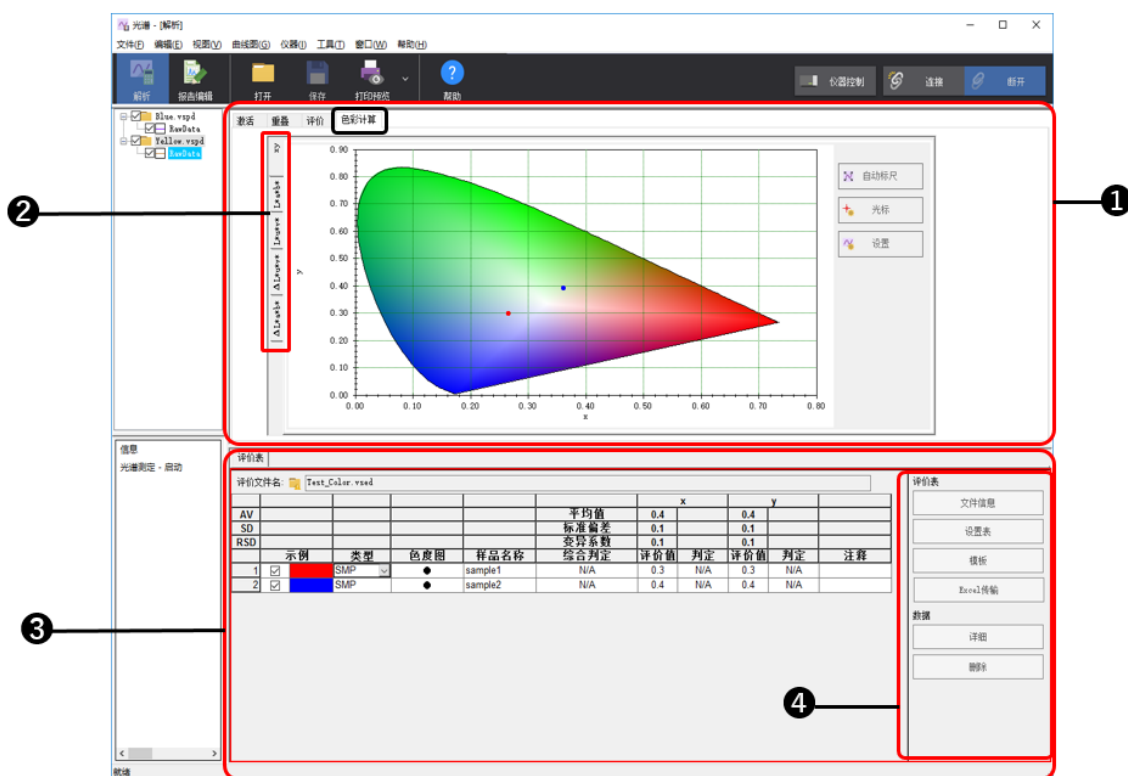


画面构成 - 色彩值计算

No.	名称	功能
①	图表视图	安装色彩值计算后，图表视图图中将添加 [色彩] 选项卡。选择选项卡，将显示色度图。
②	色度图选择选项卡	可选择色度图。 ▶▶ 参考 色度图的详细内容请参考“2.1.2 色度图”P.8。
③	评价表	显示色彩值的计算结果。此外，还可对色度图中显示的标绘点进行设置更改或设置标准样品。
④	设置区域	设置与色彩值计算相关的参数、确认数据的详细信息和删除数据。 ▶▶ 参考 评价项目的详细内容请参考“1.2 评价项目”P.2。

2.1.2 色度图

计算色彩值后，各评价项目的色度图中将显示标绘点。

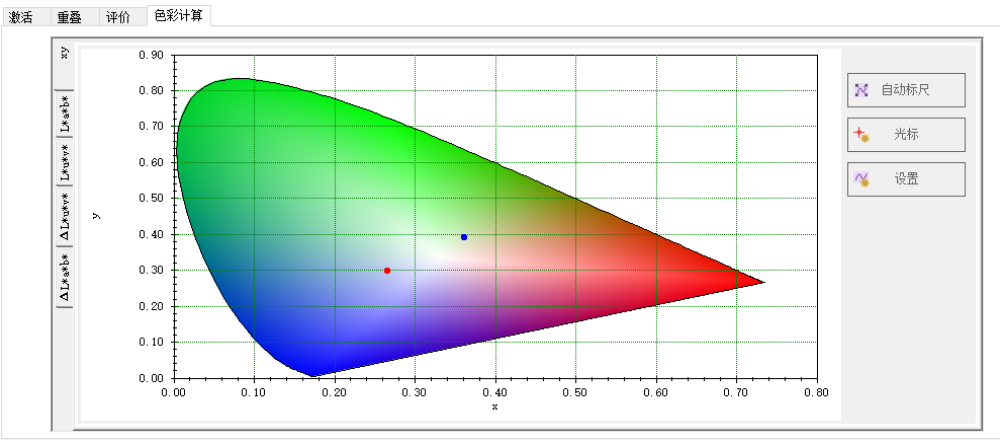

色度图- [XYZ色彩空间]

标绘点的形状可通过评价表的 [色度图] 更改。

注释 如果色度图中需要的评价项目（色度坐标x、y等）尚未评价，将不显示。

提示 标绘点的显示颜色与评价表的示例颜色相同。

参考 各数据的示例颜色可通过 [评价] 选项卡- [曲线图设置] - [线条类型和颜色] 更改。

选项卡	显示的画面
xy	用xy表示XYZ色彩空间的色度图
L*a*b*	• 用a*b*表示L*a*b*色彩空间的色度图 • L*的绘图
L*u*v*	• 用u*v*表示的L*u*v*色彩空间的色度图 • L*的绘图
$\Delta L^* \Delta a^* \Delta b^*$	• $\Delta a^* \Delta b^*$的绘图 • L*的绘图
$\Delta L^* \Delta u^* \Delta v^*$	• $\Delta u^* \Delta v^*$的绘图 • L*的绘图

注释

- [L*a*b*] 和 [L*u*v*] 中使用的背景颜色为基于sRGB的颜色。
- 无法绘制“Hunter Lab”图表。

2.2 色彩值计算的操作步骤

色彩值计算将应用到数据处理的评价功能中。

▶▶ 参考 评价功能的详细信息请参考LabSolutions UV-Vis的使用说明书（基本操作篇）的第8章“数据处理”。

2.2.1 评价项目的设置

安装色彩值计算后，图表视图中将添加[色彩]选项卡。同时，评价项目中色彩值计算的项目变为可选择。

这里将XYZ色彩空间的色度坐标xy设置为计算项目。

1

在[解析模式]中单击图表视图[色彩]选项卡。

2


单击[评价表]的[文件信息]，输入[评价文件名]和[分析者姓名]，单击[确定]。

3

单击[评价表]的[设置表]，再单击[评价项目]选项卡的[添加]。

4

在色彩计算项目中选择[XYZ色彩空间] - [色度坐标] - [x]。
安装色彩值计算后，将添加评价项目。

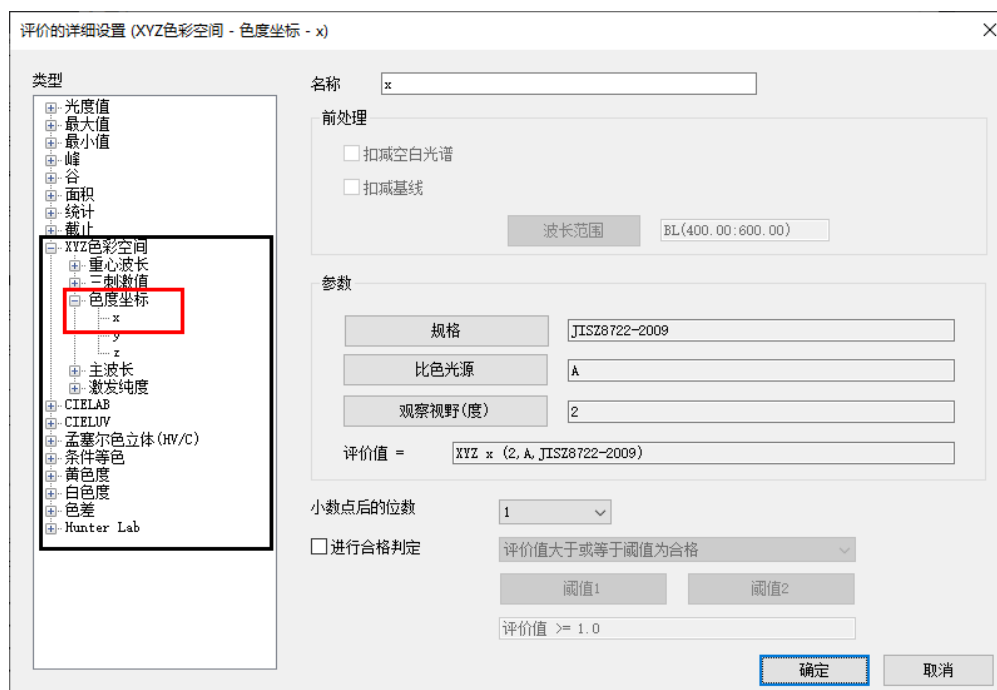

[评价的详细设置]画面

5

输入 [名称]，选择 [参数] 的 [规格]、[比色光源]、[观察视野]。

■ 注释 根据计算项目不同，可选择的 [规格]、[比色光源]、[观察视野] 不同。

▶▶ 参考 计算项目的详细信息请参考“1.2 评价项目”P.2或LabSolutions UV-Vis的帮助。

评价的详细设置 (XYZ色彩空间 - 色度坐标 - x)

名称: x

前处理

☐ 扣减空白光谱

☐ 扣减基线

波长范围: BL(400.00:600.00)

参数

规格: JISZ8722-2009

比色光源: A

观察视野(度): 2

评价值 = XYZ x (2, A, JISZ8722-2009)

小数点后的位数: 1

☐ 进行合格判定

评价值大于或等于阈值为合格

阈值1: 阈值2:

评价值 >= 1.0

确定 取消

[评价的详细设置] 画面- [XYZ色彩空间] - [色度坐标X]

规格


JISZ8722-2009

JISZ8722-2009


ASTM308-15

确定 取消

[规格] 选择画面

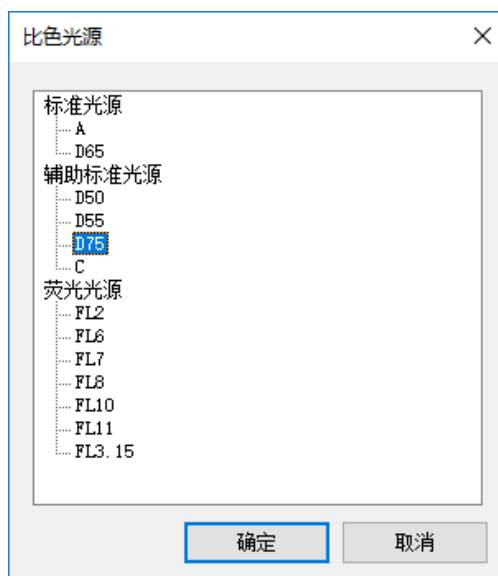

[比色光源] 选择画面

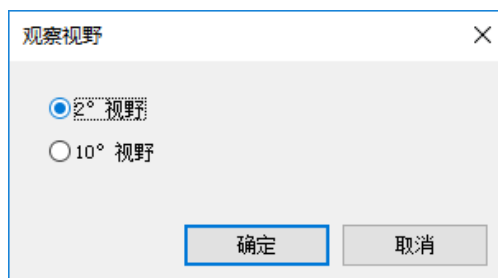


[观察视野] 选择画面

6

单击 [确定]。


设置的内容将显示在〔设置表〕画面。

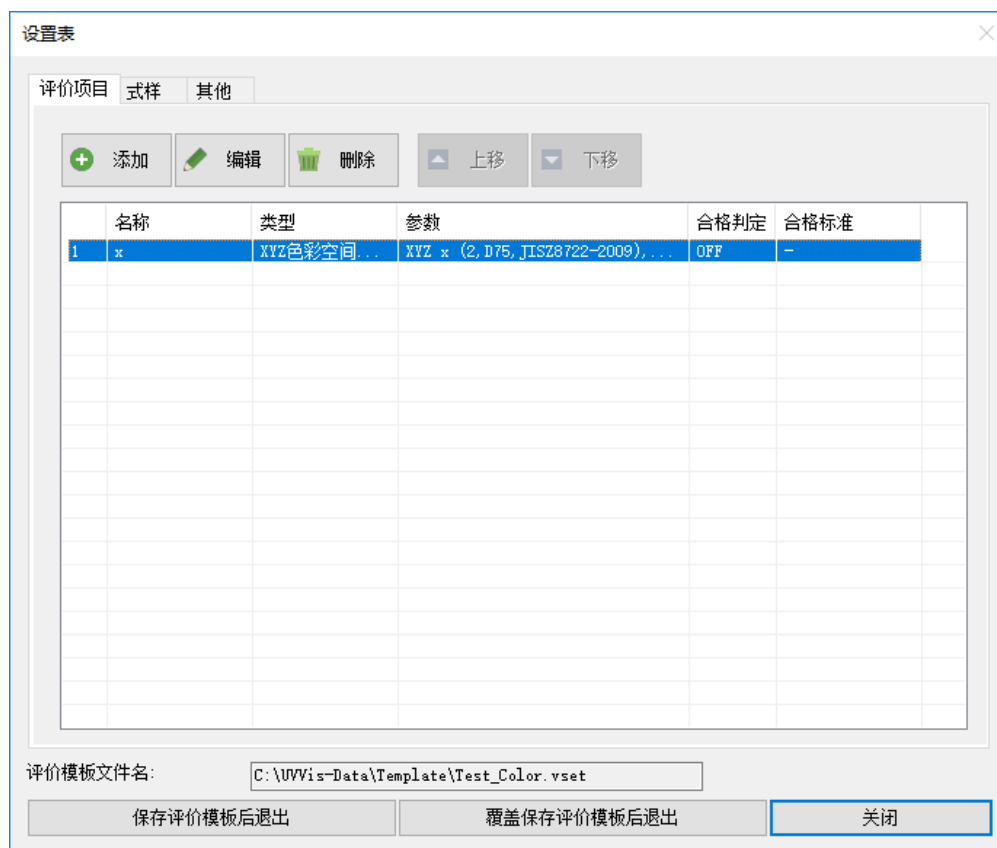

添加 [设置表] - [色度坐标x] 后

7


同样，将〔色度坐标y〕添加到评价项目中。

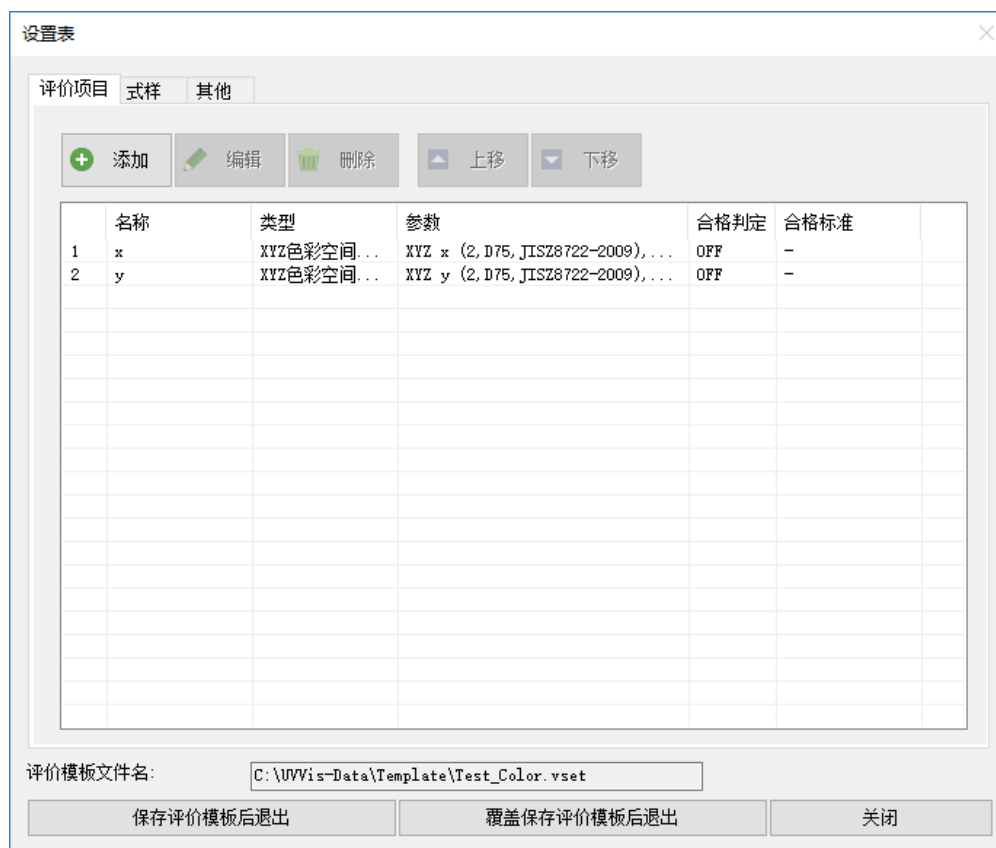

添加 [设置表] - [色度坐标y] 后

8


单击 [式样] 选项卡，勾选 [色度图]。
可设置评价表中显示的行和列。

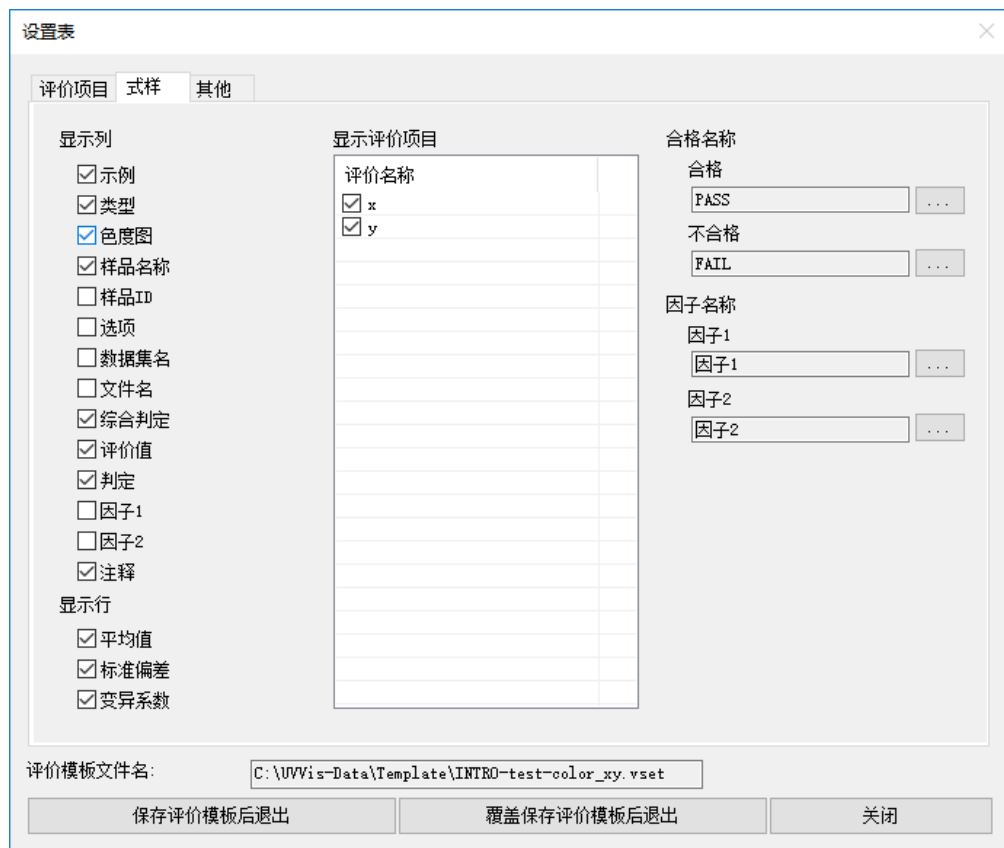

[设置表] - [式样] 选项卡

9

单击 [保存评价模板后退出]，保存评价模板。
将设置评价表。

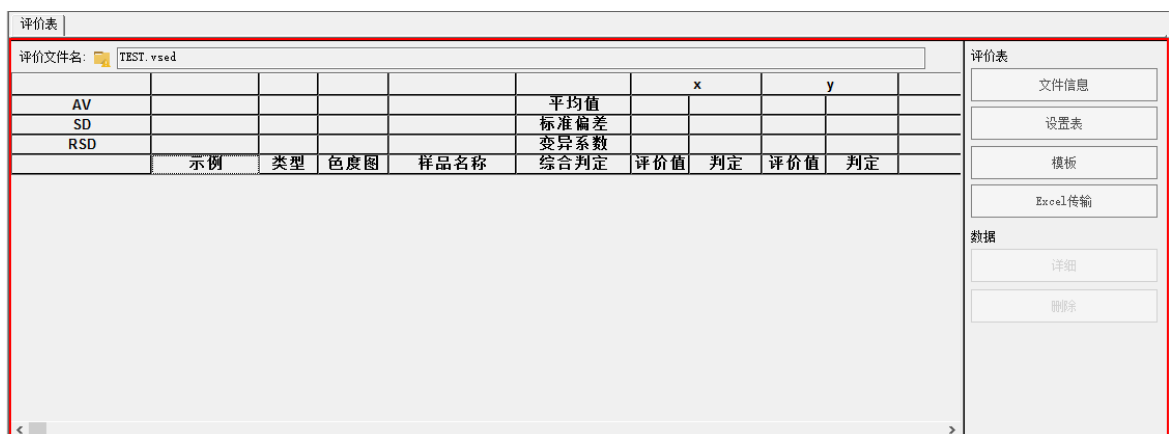


评价表

2.2.2 数据的加载

1 打开要评价的光谱数据，拖放到评价表中。
计算色彩值并绘制色度图。

▶▶ 参考 光谱数据的打开方法的详细信息，请参考LabSolutions UV-Vis的基本操作说明书的第8章或帮助。

■ 注释 如果色度图中需要的评价项目（色度坐标x、y等）尚未评价，将不显示。

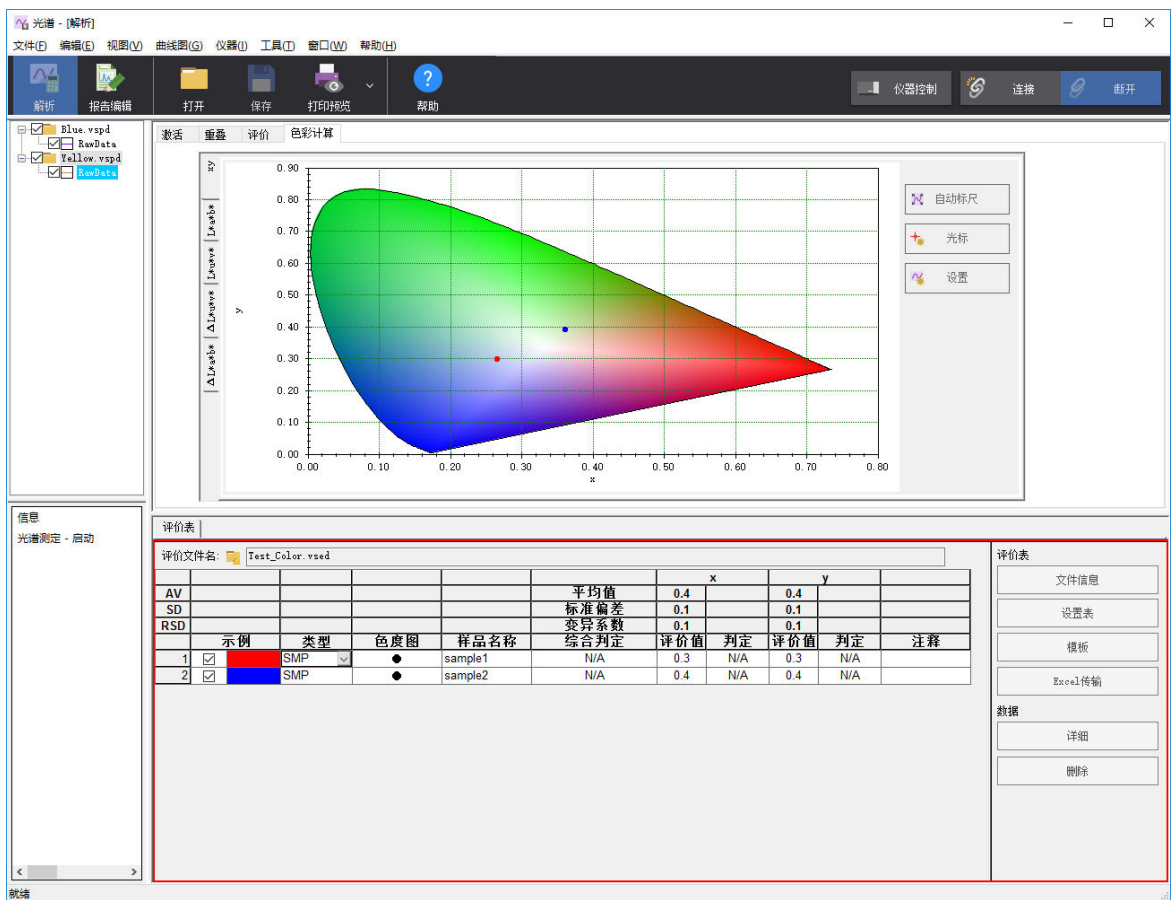


2.2.3 数据的保存

通过色彩值计算得到的数据或参数可与其他评价项目一样，保存为评价文件。

1

选择 [文件] 菜单的 [保存] - [评价文件]。

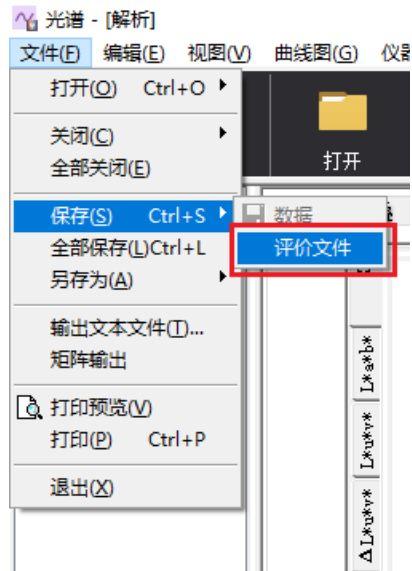


保存评价文件

将保存为评价文件。

2.2.4 色度图的打印

各色度图可通过 [报告编辑] 打印。
单击工具栏的 [报告编辑]，可从对象列表的 [光谱] - [示例] - [曲线图] 中选择。
▶▶ 参考 报告编辑的详细信息请参考LabSolutions UV-Vis的基本操作说明书的第8章或帮助。

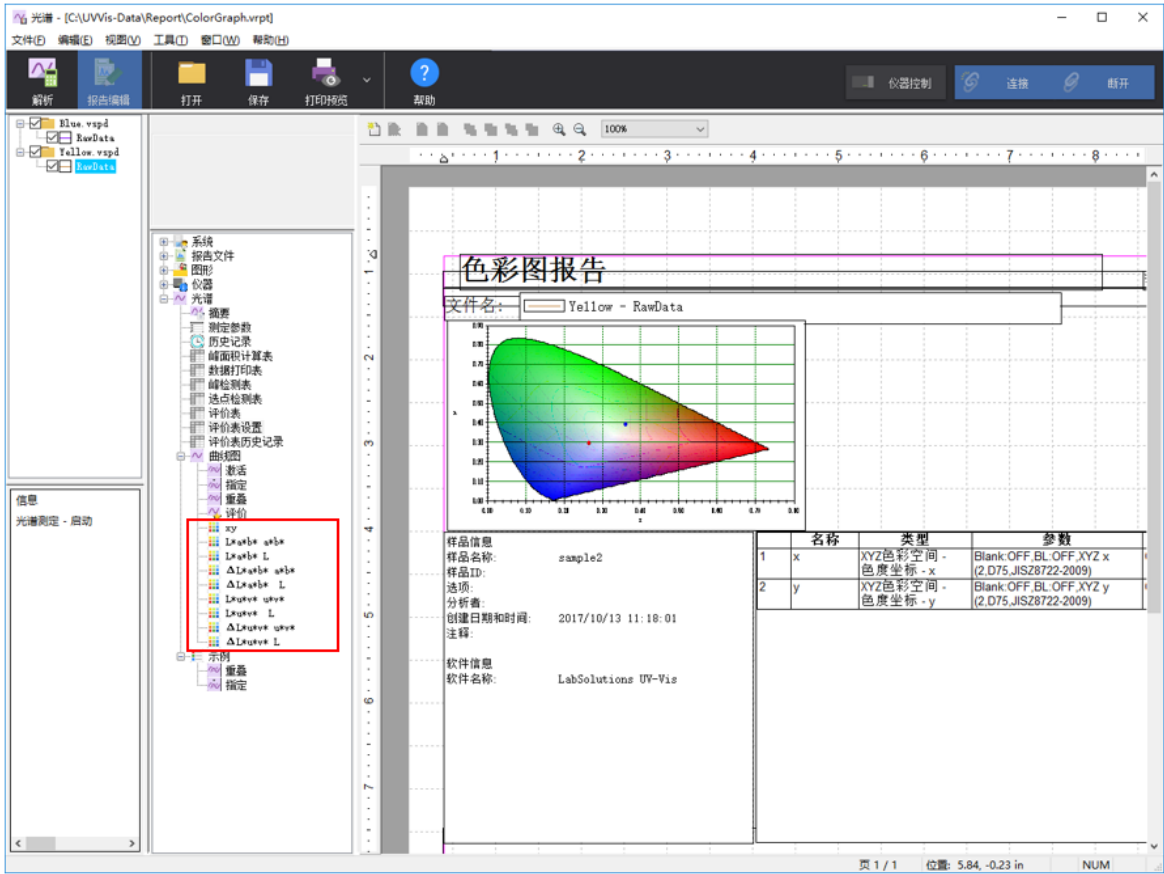

对象列表- [色度图]

2.3 应用篇

■ 注释 如果要将数据传输到Excel，需要Microsoft Excel。
本产品中不含Microsoft Excel。请另外准备。

下面介绍计算色差的方法和将评估表传输到Excel的方法。


2.3.1 计算色差的方法

以CIELAB 1976 L*a*b*色彩空间计算的明度差（ ΔL^* ）时，需要设置“标准样品”以作为标准。

单击标准样品评价表的[类型]，从下拉列表中选择[STD]并设置。

💡 提示 STD…标准样品、SMP…测定样品、BLK…空白测定。


- 注释
- 根据评价表中测定样品与其上一行（最接近的行）的标准样品差计算色差。
 - 如果测定样品的上方没有标准样品信息，将无法计算色差。

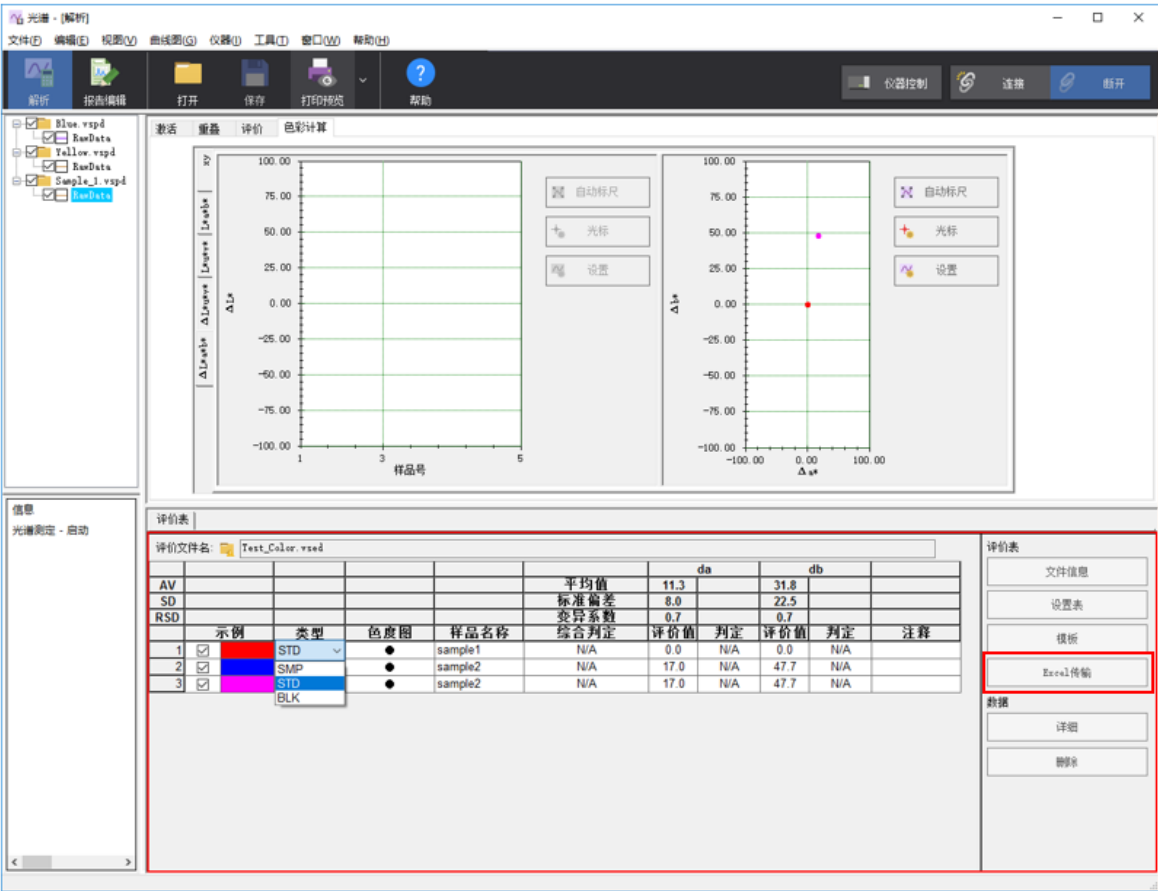


色差显示画面

2.3.2 Excel传输

在Excel文件打开的状态下，单击[Excel传输]，评价表中显示的值将传输到Excel文件中。

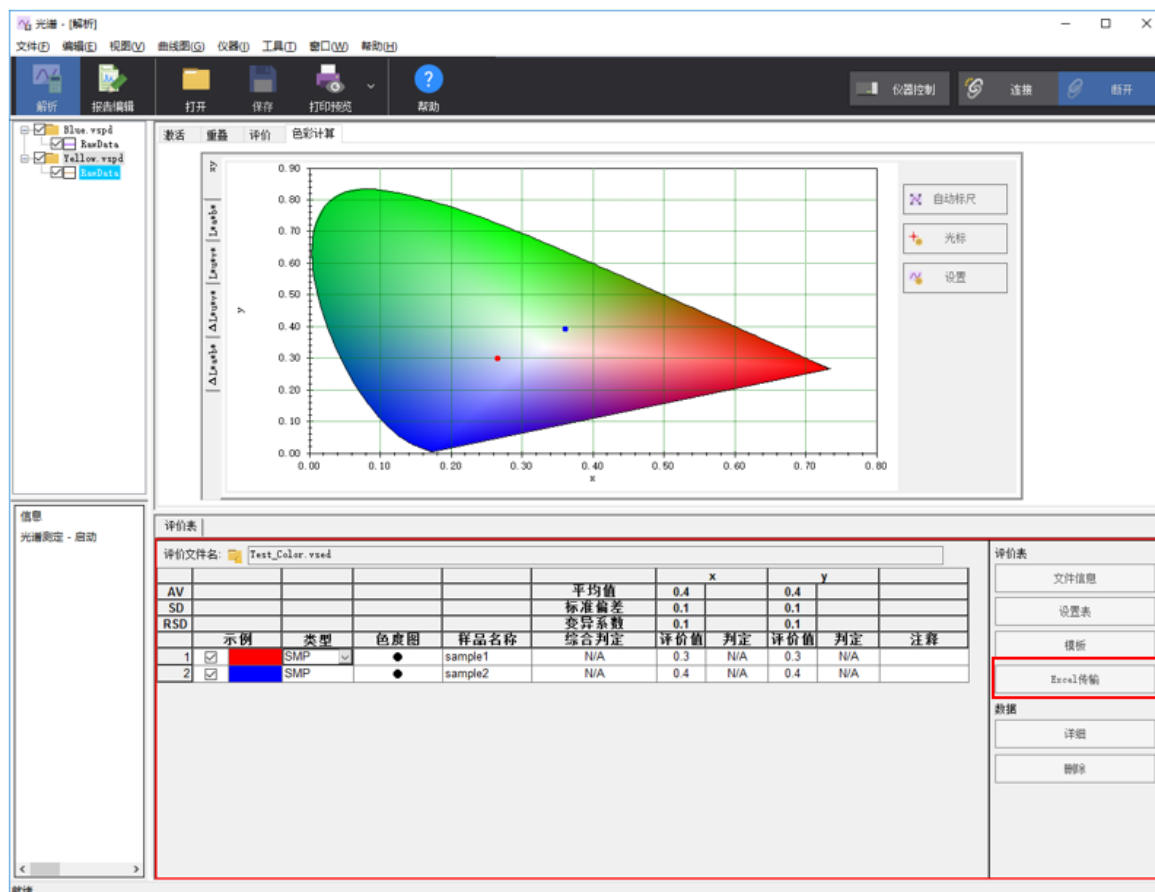

[评价表] 画面

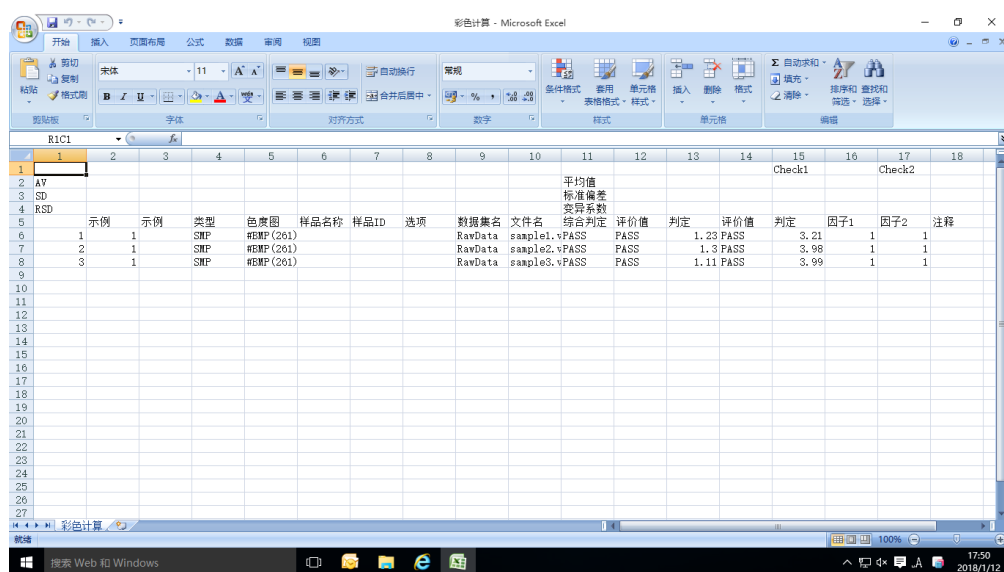

传输后的Excel

索引

B

白色度	5
比色光源	10
变黄度	5
标准样品	18

E

Excel传输	19
---------	----

G

观察视野	10
规格	10

H

黄色度	5
-----	---

L

L*a*b*色彩空间	3
Lab色彩空间	6
L*u*v*色彩空间	4

M

孟塞尔色彩空间	4
---------	---

P

评价功能	9
评价文件	16
评价项目	2

S

色彩值计算	1
色差	18
色度图	8
色差	6

T

条件等色	5
------	---

X

XYZ色彩空间	2
---------	---