

用于LabSolutions UV-Vis的系统备份功能 使用说明书

1 系统备份

备份通常指：

- ①以防范故障为目的的备份
- ②以长期保存为目的的存档


本书对使用目的为①的“系统备份”进行说明。

“LabSolutions 系统备份功能”是LabSolutions的标准功能，可在因故障导致服务器或数据库损坏时使系统恢复到备份时的状态。

虽然本功能可备份与系统设置相关的文件及数据库，但无法备份LabSolutions UV-Vis特有的设置文件及注册表信息。

本书将用于备份上述文件的工具称为“SP系统备份工具”。

将相关备份登录到任务计划程序后，可以定期自动执行备份。

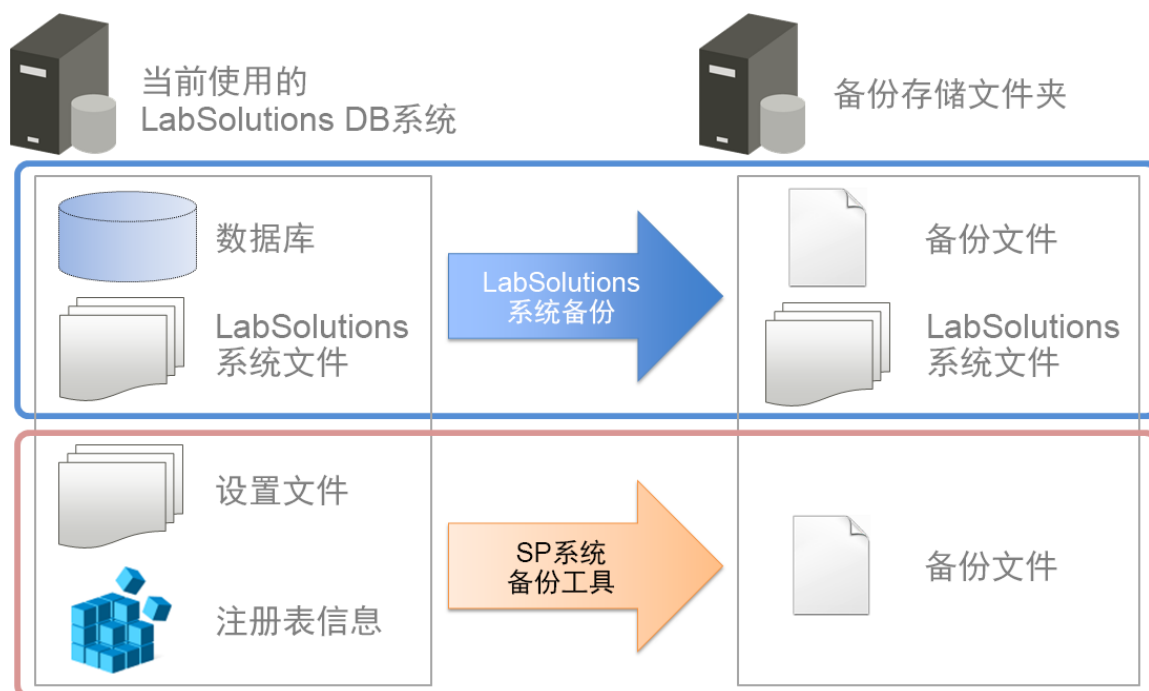

2 使用注意事项

使用时请注意以下事项：

- 执行备份及恢复需要Windows的管理员权限。
- 备份过程中将使计算机承受一定负荷，因此建议在仪器运行负荷较小时进行备份。
- 备份文件不会被覆盖，可随时追加。请注意确保备份存储设备的容量充足。

3 备份步骤

下面对使用SP系统备份工具的备份步骤进行说明。

请务必在使用LabSolutions系统备份功能进行备份后执行本操作。



提示 关于LabSolutions系统备份功能的操作步骤，请参考《223-11703B LabSolutions™ 系统备份和恢复说明书》。

3.1 备份时需要的文件

SP系统备份工具的说明如下所示。请确认各文件路径内存在对应的文件。

表1. SP系统备份工具

文件名	说明	文件路径
Shimadzu.SpectroCommon.SystemBackup.exe	备份程序	C:\Program Files (x86)\LabSolutions\UVVis\ (安装文件夹)
Shimadzu.SpectroCommon.SystemBackup.exe.config		
UVVisSystemBackup.xml	设置文件	C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\
UVVisSystemBackup.bat	备份用批处理文件	
UVVisSystemRestore.bat	恢复用批处理文件	

3.2 指定备份存储文件夹和作业文件夹

下面对编辑设置文件、指定备份存储文件夹及作业文件夹（收集备份文件并实施作业的文件夹）的步骤进行说明。



- 注释**
- 必须预先创建备份存储文件夹。
此外，备份存储设备应指定系统驱动器以外的磁盘驱动器，如连接网络的硬盘（NAS）。
以下是将驱动器E的Backup文件夹指定为备份存储文件夹时的示例。
 - 在初始状态下，作业文件夹已设置为下述文件夹：
C:\LabSolutions\Work\SPSystemBackup
如需更改为其他文件夹，请在备份源的计算机内进行设置。
作业文件夹可在执行备份时自动生成。

1

使用记事本打开下述文件。

设置文件：UVVisSystemBackup.xml



提示 可以在UVVisSystemBackup.xml中更改执行备份的文件夹和注册表。关于详细说明，请参考3.3节。

2

在“<BackupDestDirectory>”与“</BackupDestDirectory>”之间指定备份存储文件夹。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ZipSystemBackupConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in
  <!-- Backup destination -->
  <BackupDestDirectory>E:\Backup</BackupDestDirectory>
```

3

在“<WorkDirectory>”与“</WorkDirectory>”之间指定收集备份文件并实施作业的文件夹。

```
<!-- Path to collect files for backup and restore -->
<WorkDirectory>C:\LabSolutions\Work\SPSystemBackup</WorkDirectory>
</ZipSystemBackupConfig>
```

4

未使用UV认证软件时，请删除<BackupSrcDirectoryInfos>与</BackupSrcDirectoryInfos>所包夹的行。

```
<!-- List of folders to backup -->
<!-- Excluded Folders -->
<BackupSrcDirectoryInfos>

</BackupSrcDirectoryInfos>
```

5

保存后关闭记事本。

3.3 更改执行备份的文件夹和注册表

可以使用SP系统备份工具更改执行备份的文件夹和注册表。

具体而言，可以对保存有定量测定结果文本文件、谱图的峰检测表文本文件和UV认证软件条件文件的文件夹进行设置。

无需更改时请前进至3.4节。

1

使用记事本打开下述文件。

设置文件：UVVisSystemBackup.xml

2

<BackupSrcDirectoryInfos>与</BackupSrcDirectoryInfos>之间指定需要执行备份的文件夹。

```
<!-- List of folders to backup -->
<!-- Excluded Folders -->
<BackupSrcDirectoryInfos>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>C:\UVVis-Data\Text</BasePath> ①
    <ExcludeRelativePaths>
      <string>Methods</string> ②
    </ExcludeRelativePaths>
  </BackupSourceInfo>
</BackupSrcDirectoryInfos>
```

①在<BasePath>与</BasePath>之间指定需要执行备份的文件夹的路径。

②通过在<ExcludeRelativePaths><string>与</string></ExcludeRelativePaths>之间指定不执行备份的文件夹名称，可以从备份对象中排除部分文件夹。

3

<BackupSrcRegistryInfos>与</BackupSrcRegistryInfos>之间指定需要执行备份的注册表。

```
<!-- List of registries to backup -->
<!-- Registry cannot be excluded -->
<BackupSrcRegistryInfos>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Modules</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Report\Settings</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Extensions\UVPhotometerStatusBar</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Configuration\Settings</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Modules</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Report\Settings</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Extensions\PhotometerStatusBar</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
  <BackupSourceInfo>
    <BasePath>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Tools</BasePath>
  </BackupSourceInfo>
</BackupSrcRegistryInfos>
```

4

保存后关闭记事本。

3.4 手动备份操作


以下是手动进行备份时的操作步骤。

1

在下述批处理文件上右击，选择〔以管理员身份运行〕。

备份用批处理文件：UVVisSystemBackup.bat

 注释 备份工具需要由Windows的管理员用户执行。

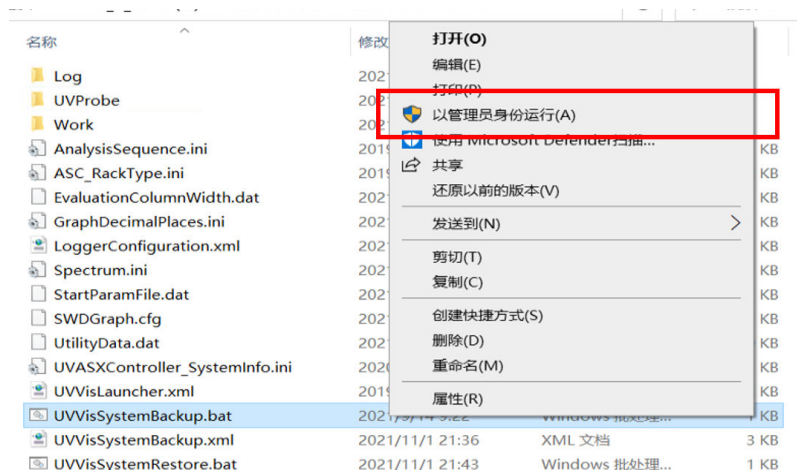

 提示 备份用批处理文件将会执行Call命令。无需进行编辑。

call 执行程序（exe） 参数1

执行程序：备份程序（exe）


参数1：设置文件名（xml）

```
cd /d %~dp0
```

```
call "C:\Program Files (x86)\LabSolutions\UVVis\Shimadzu\SpectroCommon\SystemBackup.exe"  
"C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\UVVisSystemBackup.xml"  
pause
```

2

备份过程中将会输出进度。

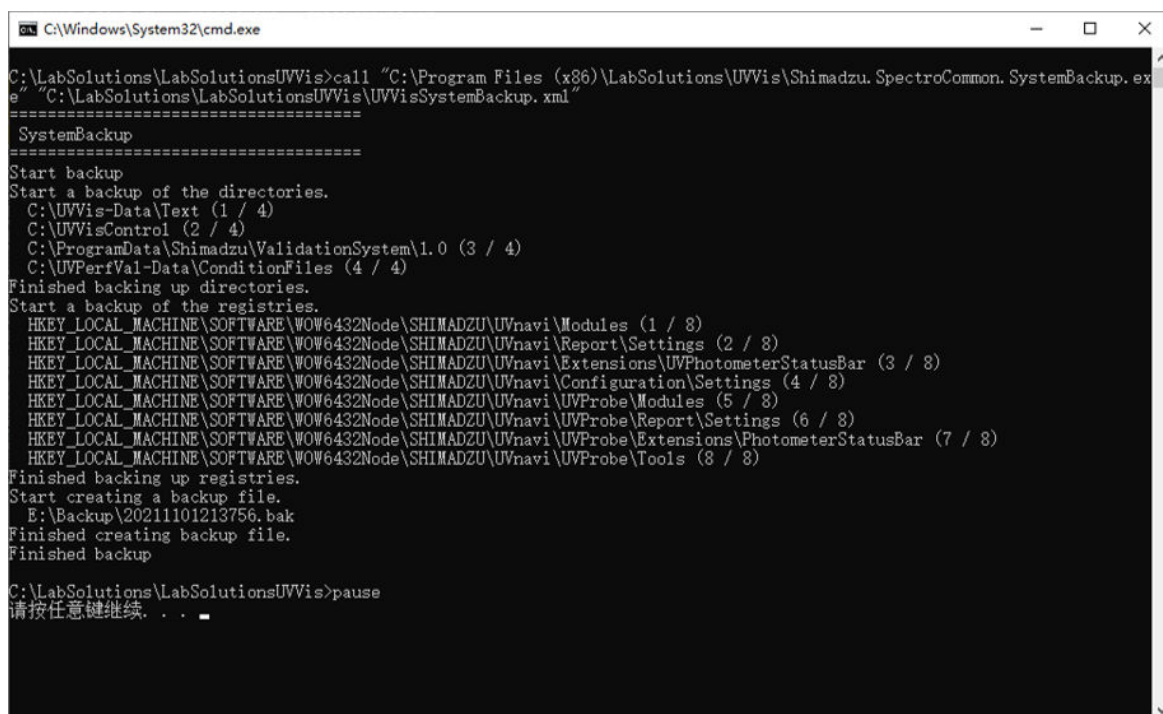

```
C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis>call "C:\Program Files (x86)\LabSolutions\UVVis\Shimadzu.SpectroCommon.SystemBackup.exe" "C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\UVVisSystemBackup.xml"

=====
SystemBackup
=====
Start backup
Start a backup of the directories.
C:\UVVis-Data\Text (1 / 4)
C:\UVVisControl (2 / 4)
C:\ProgramData\Shimadzu\ValidationSystem\1.0 (3 / 4)
C:\UVPerfVal-Data\ConditionFiles (4 / 4)
Finished backing up directories.
Start a backup of the registries.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Modules (1 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Report\Settings (2 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Extensions\UVPhotometerStatusBar (3 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Configuration\Settings (4 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Modules (5 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Report\Settings (6 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Extensions\PhotometerStatusBar (7 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Tools (8 / 8)
Finished backing up registries.
Start creating a backup file.
E:\Backup\20211101213756.bak
Finished creating backup file.
Finished backup

C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis>pause
请按任意键继续. . .
```

3

显示“请按任意键继续...”后，请按下任意键。应用程序将会关闭。

3.5 定期自动执行备份的方法

通过使用任务计划程序，可以定期自动执行备份。

请编制“在使用LabSolutions系统备份功能执行备份后，使用SP系统备份工具执行备份”的计划。

1

从控制面板启动管理工具-任务计划程序。


2

执行“创建基本任务”。

3

按照下述设置创建任务。

- 创建基本任务
对 [名称] 指定合适的任务名称（例：UVVisSystemBackup）。
- 触发器
指定执行备份的时间（例：每日，18:00:00）。
- 操作
选择 [启动程序]。
单击 [程序或脚本] 的 [浏览] 按钮，选择3.1表1内记载的 Shimadzu.SpectroCommon.SystemBackup.exe。
根据3.1表2对 [添加参数] 指定设置文件的文件路径。
C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\UVVisSystemBackup.xml

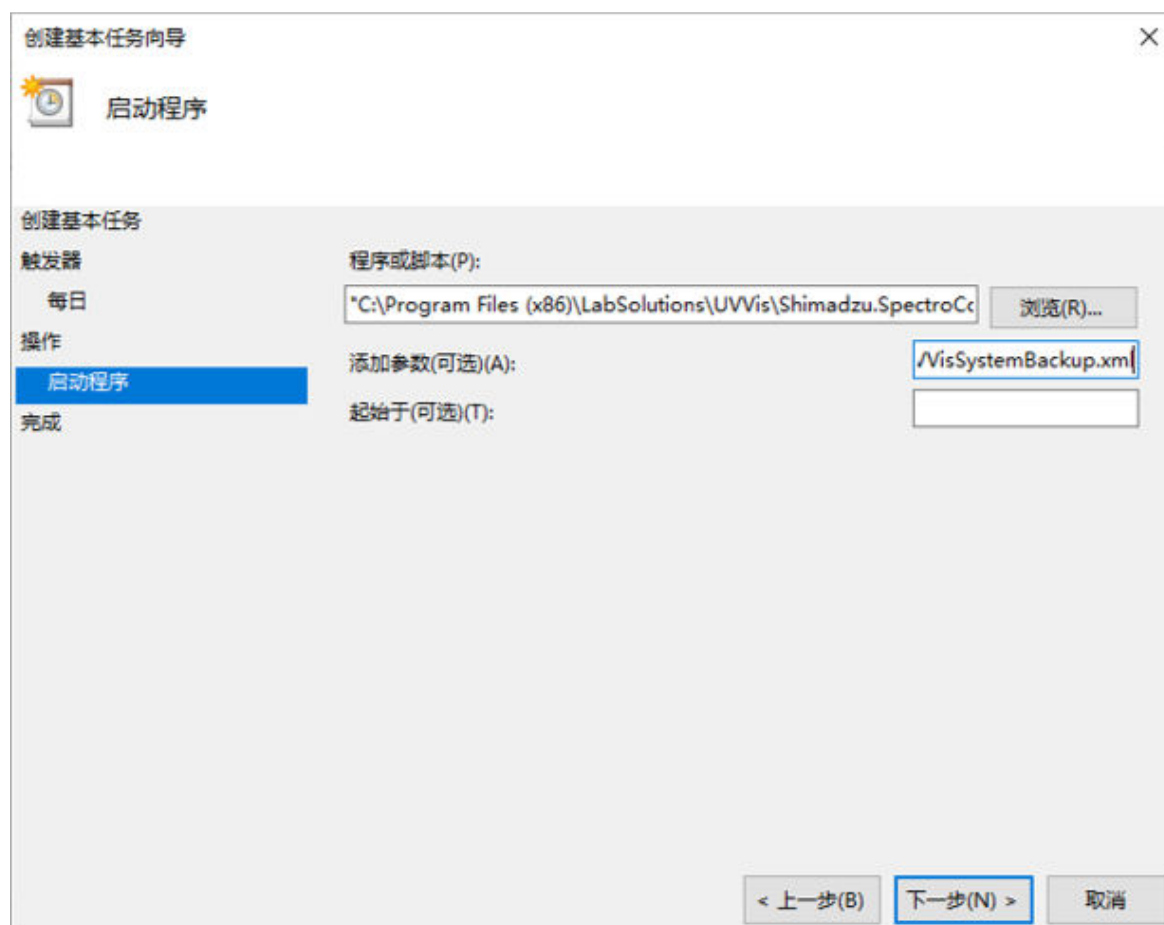

4

再次打开创建的任务，进行下述设置。

- [常规] 标签
对 [运行任务时，请使用下列用户帐户] 指定拥有操作系统管理员权限的用户。
选择 [不管用户是否登录都要运行]。
勾选 [使用最高权限运行]。


 **注释** 更改任务计划程序内指定用户的密码后，需要重新设置任务计划程序。

3.6 确认备份结果

执行系统备份后，备份存储设备内将生成备份文件（YYYYMMDDHHMMSS.bak）和处理结果文件（YYYYMMDDHHMMSS.txt）。

打开处理结果文件，确认全部为“Success”。

显示“Fail”时，请确认设置文件的内容。如备份源的文件夹及注册表是否存在，或者如果记述内容有误，请在修改后执行备份。

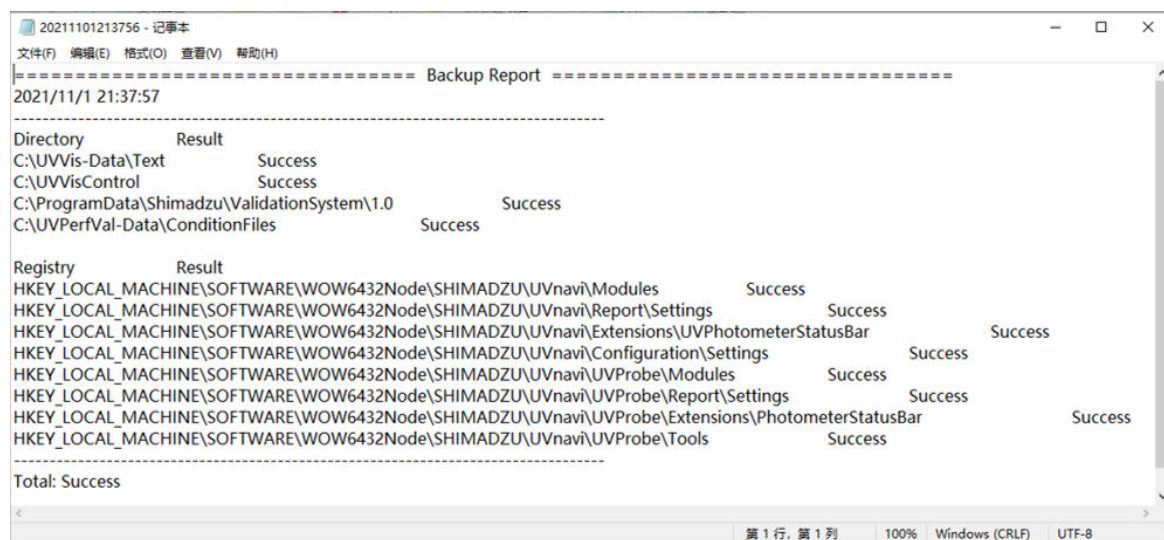

4 恢复步骤

使用备份的文件恢复本地文件夹的文件和注册表。
下面对使用SP系统备份工具的恢复步骤进行说明。

4.1 确认恢复目标

恢复目标的计算机必须处于下述状态：

- 已安装操作系统及软件（如LabSolutions Manager、连接组件、LabSolutions UV-Vis）
- LabSolutions数据库正常运行
- 已使用LabSolutions系统恢复功能恢复数据库和C:\LabSolutions文件夹内的文件

4.2 初始设置：指定恢复源

1

使用记事本打开下述文件。

恢复用批处理文件：UVVisSystemRestore.bat

2

指定执行恢复的备份文件名。

```
cd /d %~dp0
```

```
call "C:\Program Files (x86)\LabSolutions\UVVis\Shimadzu.SpectroCommon.SystemBackup.exe"  
"C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\UVVisSystemBackup.xml" "E:\Backup\20211101213756.bak"  
pause
```



提示 恢复用批处理文件将会执行Call命令。

```
call 执行程序 参数1 参数2
```

执行程序：备份程序（exe）

参数1：设置文件名（xml）

参数2：备份文件名（bak）

3

保存后关闭记事本。

4.3 执行恢复


 **注释** 请务必在使用LabSolutions系统恢复功能执行恢复后执行本操作。

1

在下述批处理文件上右击，选择〔以管理员身份运行〕。

恢复用批处理文件：UVVisSystemRestore.bat

 **注释** 备份工具需要由Windows的管理员用户执行。

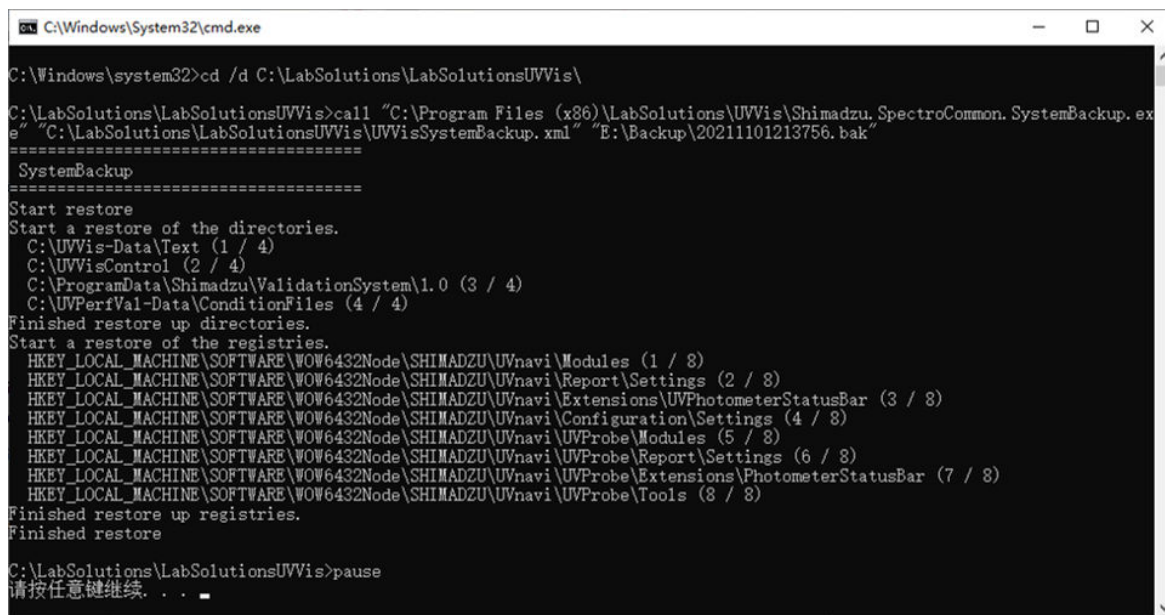

```
C:\Windows\system32>cd /d C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\

C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis>call "C:\Program Files (x86)\LabSolutions\UVVis\Shimadzu.SpectroCommon.SystemBackup.exe" "C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis\UVVisSystemBackup.xml" "E:\Backup\20211101213756.bak"

=====
SystemBackup
=====
Start restore
Start a restore of the directories.
C:\UVVis-Data\Text (1 / 4)
C:\UVVisControl (2 / 4)
C:\ProgramData\Shimadzu\ValidationSystem\1.0 (3 / 4)
C:\UVPerfVal-Data\ConditionFiles (4 / 4)
Finished restore up directories.
Start a restore of the registries.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Modules (1 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Report\Settings (2 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Extensions\UVPhotometerStatusBar (3 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\Configuration\Settings (4 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Modules (5 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Report\Settings (6 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Extensions\PhotometerStatusBar (7 / 8)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SHIMADZU\UVnavi\UVProbe\Tools (8 / 8)
Finished restore up registries.
Finished restore
C:\LabSolutions\LabSolutionsUVVis>pause
请按任意键继续. . .
```

2

恢复过程中将会输出进度。


3

显示“请按任意键继续...”后，请按下任意键。应用程序将会关闭。

设置文件所指定的备份文件夹内将生成日志文件。

- RestoreResultYYYYMMDDHHMMSS.txt

打开文本文件，确认全部为“Success”。

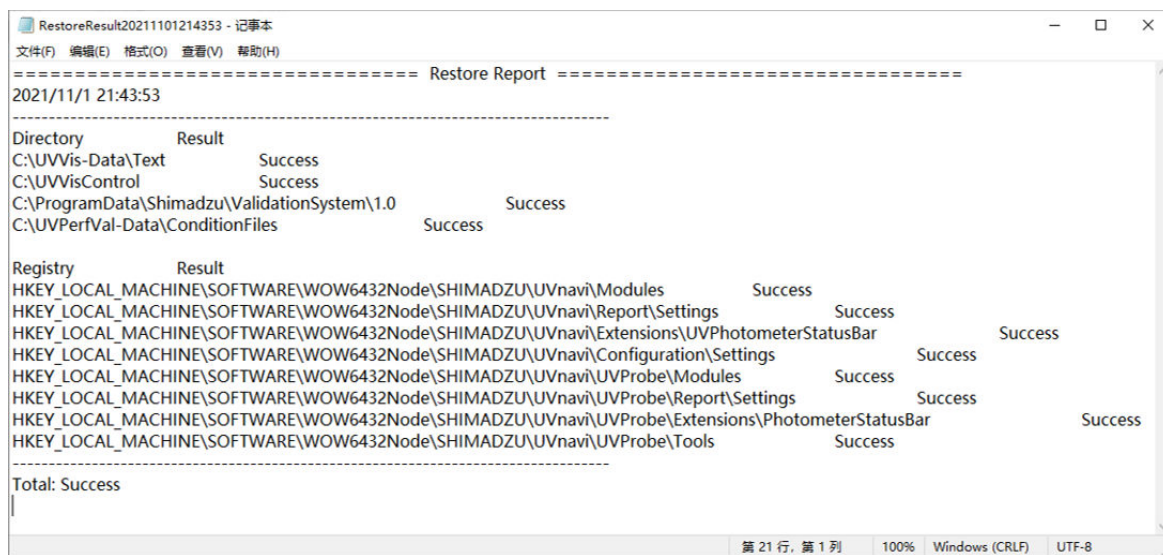

本说明书是日文版《用于LabSolutions UV-Vis的系统备份功能使用说明书》（207-90751）（第1版 2021年11月）的译文。