

LabSolutions™ DB/CS

管理说明书

UV-Vis 附册

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

前言

请在使用本产品前仔细阅读本说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本说明书记载了本产品的使用方法及选配件等信息。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书转交给后续用户。
- 如果本说明书或本产品警告标签丢失或损坏，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作本产品，请委托您所在区域内的岛津分公司进行安装、调试、修理或搬动仪器后的重新安装。

声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。
Windows是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。
在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《LabSolutions DB/CS 管理说明书 UV-Vis附册》（207-90401）（修订版A 2019年10月）的译文。

使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

标记	说明
▼ 注释	正确使用本产品的附加说明。
▶▶ 参考	标注参考页数。

鼠标和窗口操作

标记	说明
单击	指向对象，用鼠标左键点击一次的动作。
右击	指向对象，用鼠标右键点击一次的动作。
双击	指向对象，用鼠标左键点击两次的动作。
[] 内的文字	窗口上的按钮名称和窗口名称。 示例：单击 [确定]。
“ ” 内的文字	输入的数值、文字、键盘的名称。 示例：按住“Ctrl”键的同时按“N”键。

本书使用指南

UV-Vis机型使用LabSolutions UV-Vis和LabSolutions Manager构建LabSolutions DB/CS系统。包括本书在内，使用说明书的组成如下表所示。

请根据需要参考各使用说明书的详细内容，具体如下：

使用说明书	内容
LabSolutions Manager DB 安装维护说明书 或 LabSolutions Manager CS 安装维护说明书	对LabSolutions系统的安装方法、故障排除和系统配置进行说明。
LabSolutions DB/CS 安装维护说明书 UV-Vis附册	对UV-Vis机型专用的安装方法、故障排除和系统配置进行说明。
LabSolutions Manager DB管理说明书 或 LabSolutions Manager CS管理说明书	对LabSolutions系统的管理功能使用方法进行说明。
LabSolutions DB/CS 管理说明书 UV-Vis附册（本书）	对UV-Vis机型专用的管理功能使用方法进行说明。
LabSolutions UV-Vis 基本操作说明书	对LabSolutions UV-Vis的基本操作方法进行详细说明。

关于LabSolutions各命令的详细说明和使用方法，请参考帮助文件。

保修

本产品的保修内容如下：

1. 保修期

请咨询您所在区域内的岛津分公司。

2. 保修内容

对保修期内因本公司原因造成的故障将免费维修或免费更换部件。但对计算机及其外围设备、部件等短寿命产品可能无法提供同一型号的产品。

3. 责任范围

(1) 任何情况下本公司均不对用户的误工费、间接性损害和衍生性损害负任何责任。也不对因第三方向用户提起的损坏赔偿负任何责任。

(2) 任何情况下本产品的最高赔偿金额均以出厂价格或销售价格为限。

4. 责任免除

下列故障不属于保修范围：

(1) 操作不当。

(2) 非本公司或本公司指定的其他公司对本产品进行的维修或改装。

(3) 与非本公司指定的硬件或软件一起使用。

(4) 因计算机病毒造成的本产品故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(5) 因停电或电压突然降低等电源故障引发的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(6) 错误关机造成的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(7) 非产品本身原因造成的故障。

(8) 因在高温高湿、腐蚀性气体或震动等恶劣环境中使用本产品而造成的故障。

(9) 因火灾、地震或其他自然灾害、放射性物质和有害物质的污染，以及战争、暴乱和犯罪等不可抗力事故造成的故障。

(10) 安装后用户自行移动或运输产品时造成的故障。

(11) 消耗品或等同于消耗品的部件（CD-ROM等）。

* 如果产品附带保修单或单独签署了包括保修事项在内的合同，则应遵守该文件记载的保修内容。

软件使用协议

本软件使用协议（以下称为“本协议”）是用户和株式会社岛津制作所（以下称为“我公司”）之间所达成的协议。

在使用我公司的软件（以下称为“本软件”）、附带的手册等有关资料以及电子文件等（以下合并称为“本软件产品”）之前，请充分阅读本协议的各条款。在安装、复制或者使用本软件时，默认为用户同意本协议的各条款。如果不同意本协议的各条款，则本软件产品的使用不被认可。

1. 权利归属

本软件产品的著作权等知识产权，属我公司或者另外指定的第三方所有。

2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可用户对本软件拥有非垄断性使用，但不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件产品使用权是指只授予用户一台电脑对本软件产品的使用权。

3. 使用限制

(1) 用户除了备份的目的以外，无论在任何情况下都不能对本软件产品的全部或者是一部分进行复制、复写，并不能对本软件产品进行修改、追加等改变。

(2) 不论有偿或无偿，用户均无权对本软件产品及其复制品的全部或者是一部分，向第三方出售、分发、出借、转让、或者是再使用。

(3) 用户不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编。

4. 保证范围

(1) 本软件的光盘或者手册等关联资料，如果是由于我公司的责任造成物理上的不良（光盘不良、错页、缺货），用户在本软件产品的交付日开始12个月以内发现，并与我公司联系的情况下，我公司将无偿更换。

(2) 我公司将向用户提供为了修改本软件的错误、程序缺陷等而编制的修改软件、或修改程序（以下称为“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。关于提供修改程序或者修改信息的必要性、提供方法以及时期等，由我公司进行判断决定。

关于修改程序的导入或者是否按照修改信息进行处理，则由用户判断与实施。

(3) 我公司在上述各项规定以外，对于本软件产品不做任何保证。

5. 责任限制

(1) 我公司无论在什么情况下，对用户损失利益、特殊的、意外的事情所发生的损害以及由第三方提出索赔带来的损失，不负任何责任。

(2) 我公司需对用户承担损害赔偿责任人时，无论在什么情况下，最高不超过用户实际支付本软件产品的购买金额。

6. 解约

(1) 如果用户违反本协议规定的任何一项条款时，我公司都将立即解除本协议。

(2) 本协议结束时，按照本协议规定，用户的权利也同时结束。用户在本协议结束后应及时地将本软件产品以及其复制品全部销毁。

7. 其他

(1) 本协议依据日本国法令制定。

(2) 有关本协议的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

售后服务及部件供货期

■ 售后服务

如果本产品无法正常运行，请参考《LabSolutions Manager DB（CS）安装维护说明书》、《LabSolutions DB/CS 安装维护说明书 UV-Vis附册》和帮助文件，进行检查和处理。
如果未能排除故障或发生其他故障，请与您所在区域内的岛津分公司联系。

■ 部件供货期

本产品部件的供货期为产品停产后七年，之后可能无法提供，敬请谅解。
非本公司生产部件的供货期请参考供货方规定。

目录

前言

使用说明书中的标记	ii
鼠标和窗口操作	ii
本书使用指南	ii
保修	iii
软件使用协议	iv
售后服务及部件供货期	v

1 系统管理

1.1 设置UV-Vis机型的仪器策略	1
1.1.1 设置仪器策略	1
1.1.2 设置测定数据及数据处理结果的保护策略	4
1.1.3 审查追踪日志	7
1.2 设置数值舍入方法和显示位数	12
1.3 系统管理	15
1.3.1 通过锁定窗口功能保护系统	15

2 数据管理

2.1 使用数据管理器进行数据管理	16
2.1.1 LabSolutions UV-Vis的文件格式	16
2.1.2 UVProbe的文件格式	18
2.2 数据管理器的其他功能	19
2.2.1 将计算机内的本地文件导入数据库	19
2.2.2 操作数据集或结果文件	19
2.2.3 连接登录数据的文件类型与程序	20

3 历史记录管理

3.1 创建历史记录	21
3.2 查看数据历史记录	22
3.3 查看测定参数的更改历史记录	23
3.3.1 加载的测定参数文件的更改历史记录	23
3.3.2 项目内测定参数文件的更改历史记录	25
3.4 查看系统日志	26

1 系统管理

本章对系统管理各项功能中的UV-Vis机型专用功能进行说明。

关于其他功能，请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书。

1

1.1 设置 UV-Vis 机型的仪器策略

▶▶ 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“1.2.1 设置系统管理方针（安全策略）”的“■设置仪器策略”。

1.1.1 设置仪器策略

1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [管理工具] 双击  （安全策略）。

2


单击 [仪器] 标签。

3

从 [仪器类型] 列表选择 [UV-Vis] 。

4

设置各项目后单击〔确定〕。

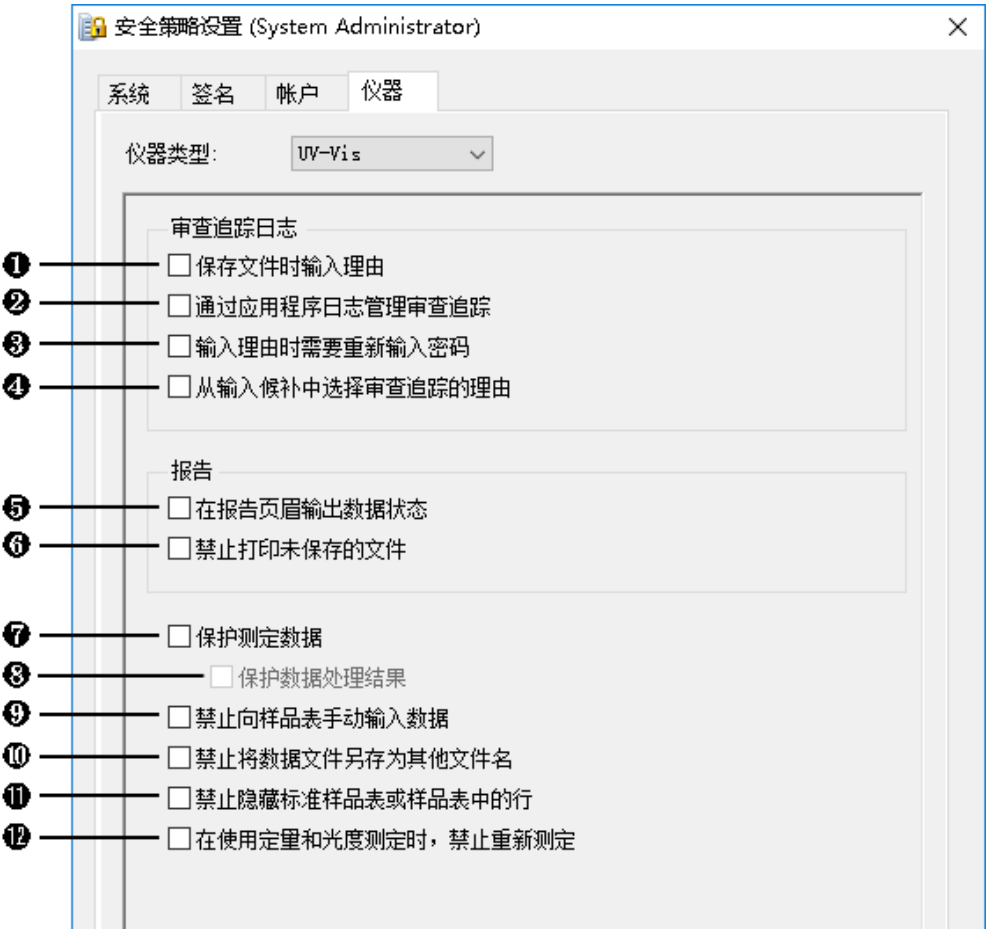

编号	名称	功能
审查追踪日志		
①	保存文件时输入理由	编辑现有（已保存）的数据文件或测定参数文件后，再次保存文件时，将显示编辑理由的输入窗口。
②	通过应用程序日志管理审查追踪	可在〔日志浏览器〕窗口的应用程序日志内显示保存数据文件或测定参数文件时记录的审查追踪日志。
③	输入理由时需要重新输入密码	输入审查追踪的更改理由时，需要输入密码。
④	从输入候补中选择审查追踪的理由	输入审查追踪的更改理由时，从预先设置的〔输入候补〕列表中选择。 通过〔LabSolutions主项目〕窗口内〔管理工具〕的  （管理输入候补）设置〔输入候补〕。 ▶▶ 参考 关于“管理输入候补”的详细说明，请参考LabSolutions的“帮助”。
报告		
⑤	在报告页眉输出数据状态	打印尚未保存的数据文件时，可在报告内输出相关信息。
⑥	禁止打印未保存的文件	禁止打印处于编辑状态的文件。

编号	名称	功能
其他		
7	保护测定数据	禁止删除测定数据。 - 光谱/时间程序： 禁止在树形视图下进行RawData的删除操作。 - 定量/光度测定： 可禁止删除包含测定数据的行或表格整体。 ▶▶ 参考 关于详细内容，请参考“1.1.2 设置测定数据及数据处理结果的保护策略” P.4。
8	保护数据处理结果	禁止删除数据处理结果。 ▶▶ 参考 关于详细内容，请参考“1.1.2 设置测定数据及数据处理结果的保护策略” P.4。 - 光谱/时间程序： 如果尚未执行保存，关闭应用程序前将自动保存文件。同时，禁止删除数据运算所生成的数据集。 - 光谱评价： 禁止删除数据行。 - 定量/光度测定： 可禁止删除用户定义的计算公式及判断公式的结果显示列。 ■ 注释 在〔保护测定数据〕为勾选状态时，可设置本安全策略。
9	禁止向样品表手动输入数据	获取定量或光度测定所生成的样品表数据时，无法选择〔手动输入〕。
10	禁止将数据文件另存为其他文件名	使〔文件〕菜单的〔另存为〕-〔数据〕或〔评价文件〕失效后，可禁止复制数据文件。 💡 提示 保存标准曲线文件时，请单击标准样品表上的〔保存〕。
11	禁止隐藏标准样品表或样品表中的行	定量或光度测定时，禁止隐藏重复数据的行及排除行（勾选“EX”列）。
12	在使用定量和光度测定时，禁止重新测定	在定量测定和光度测定中，禁止重新测定。仪器控制窗口的〔重新测定〕按钮为停用。 ■ 注释 在未勾选〔保护测定数据〕和〔在使用定量和光度测定时，禁止重新测定〕安全策略时，可使用重新测定功能。

1.1.2 设置测定数据及数据处理结果的保护策略

仪器策略中“保护测定数据”和“保护数据处理结果”的设置与LabSolutions UV-Vis运行动作的关系如下所示。

■ 光谱和时间程序

与未保存的数据文件相关的LabSolutions UV-Vis运行动作

创建测定数据集

 **提示** 无论策略设置如何，测定后均会自动保存数据文件。

操作： 测定结束时（包括通过〔中断〕所执行的测定中断）

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	将自动保存文件
勾选	不勾选	将自动保存文件
	勾选	将自动保存文件

删除数据集

操作： 树形视图的〔删除〕

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	不执行任何动作（始终有效）
勾选	不勾选	选择〔RawData〕时，〔删除〕显示为无效状态
	勾选	即使选择〔RawData〕以外的数据集，〔删除〕仍显示为无效状态

关闭文件

操作：

- 〔文件〕菜单的〔全部关闭〕
- 〔文件〕菜单的〔关闭〕
- 树状视图的〔关闭〕
- LabSolutions UV-Vis的〔退出〕

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	显示确认信息
勾选	不勾选	显示确认信息
	勾选	对未保存文件进行保存后关闭

■ 评价文件

删除行

操作： 评价表的 [删除]

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	不执行任何动作（始终有效）
勾选	不勾选	不执行任何动作（始终有效）
	勾选	即使选择数据行，[删除] 也显示为停用

关闭文件

- 操作：
- [文件] 菜单的 [全部关闭]
 - 打开其他评价文件
 - LabSolutions UV-Vis的 [退出]

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	显示确认信息
勾选	不勾选	显示确认信息
	勾选	对未保存文件进行保存后关闭

■ 定量和光度测定

表格内存在未保存的测定数据时的LabSolutions UV-Vis运行动作

删除行

操作： 选择测定行后，单击右击菜单的〔删除行〕。

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	将删除所选行
勾选	不勾选	不删除
	勾选	不删除

删除列

操作： 〔计算〕、〔判断〕结果列的删除
单击〔计算公式〕按钮，在显示的〔计算公式〕画面中单击〔删除〕。

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	将删除目标列
勾选	不勾选	将删除目标列
	勾选	禁止操作（按钮显示为无效状态）

关闭文件

操作：

- 打开现有的定量（光度测定）文件、标准曲线文件、测定参数或模板
- 〔文件〕菜单的〔导入〕（仅适用于再解析）
- 〔文件〕菜单的〔关闭〕
- LabSolutions UV-Vis的〔退出〕

系统策略的设置		LabSolutions UV-Vis的运行动作
保护测定数据	保护数据处理结果	
不勾选	不勾选	显示确认信息
勾选	不勾选	覆盖并保存文件后关闭
	勾选	覆盖并保存文件后关闭

1.1.3 审查追踪日志

如果激活（勾选）仪器策略的〔保存文件时输入理由〕，对于尚未保存的数据文件或测定参数文件，执行保存时需针对更改内容输入理由。

数据文件的数据历史记录内将同时记录输入的理由和更改内容。

测定参数文件中也保存有更改历史记录，可通过仪器控制窗口阅览。

此外，如果激活仪器策略的〔通过应用程序日志管理审查追踪〕，可在〔日志浏览器〕内查看其更改内容和理由。

下面对数据文件的审查追踪日志进行说明。

▶▶ 参考 关于测定参数文件的审查追踪日志查看方法，请参考“3.3 查看测定参数的更改历史记录” P.23。

■ 在数据记录内保留更改理由


下面以“光谱”为例，对在数据记录内保留更改理由的操作进行说明。

▶▶ 参考 关于参比数据记录的查看操作，请参考“3.2 查看数据历史记录” P.22。

1


单击工具栏的〔打开〕，打开光谱数据。

本例中打开“Demo-Spc01.vspd”。

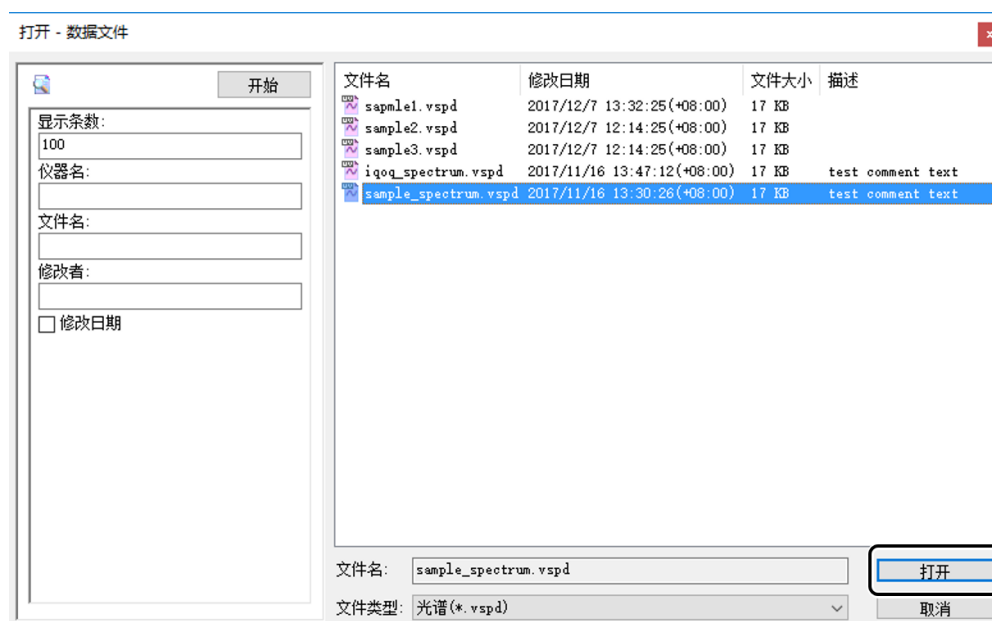

2

单击曲线图视图的〔激活〕标签。

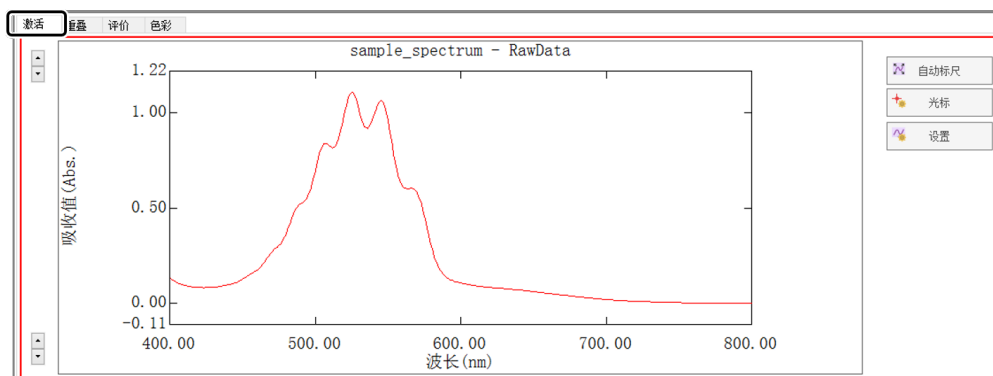

3

单击数据视图的〔峰〕标签。

4

设置峰检测表的点数和阈值后，单击〔检测〕。
本例中，阈值设置为“0.01”，点数设置为“4”。

No.	P/V	波长(nm)	吸收值(Abs.)	说明
1	●	545.0	1.06	
2	●	525.0	1.11	
3	●	507.0	0.84	

5

单击工具栏的〔保存〕。
显示〔审查追踪日志-输入理由〕窗口。

6 文件中存在多个数据且都有更改时，单击 [上一个] 或 [下一个]，一边切换数据，一边输入理由。

-  **提示**
- 如需对所有数据集应用同一更改理由，应单击 [全部适用]。
 - 如果已经激活仪器策略的 [从输入候补中选择审查追踪的理由]，请如图所示，在列表框（描述栏的上层）内选择已经登录的输入候补。可根据输入候补的设置添加描述。关于“管理输入候补”的详细说明，请参考LabSolutions的“帮助”。

审查追踪日志 - 输入理由

文件名: Sample-Project - 0-4 - sample_spectrum.vspd

用户名: User01

日期和时间: 2017/12/8 8:09:38

RawData

更改内容

峰检测 - 阈值:0.001000 点数:4

峰检测 - 阈值:0.010000 点数:4

请输入更改理由。

<上一个(P)

下一个>(N)

全部适用(A)

理由:

Peak Pick set

确定

取消

7 输入更改理由后，单击 [确定]。
将保存数据文件，数据记录内将保存输入的更改理由。


峰	面积	选点检测	转换	参数	历史记录	摘要
说明		日期和时间		用户		
新建数据集:		2017/11/16				
sample_spectrum - RawData		13:30:24				
峰检测 - 阈值:0.001000		2017/12/08		User01		
点数:4		08:08:29				
峰检测 - 阈值:0.010000		2017/12/08		User01		
点数:4		08:08:40				
更改理由 - 理由:Peak Pick set		2017/12/08		User01		
		08:12:07				

光谱数据的数据记录

■ 使用日志浏览器查看审查追踪


1

在 [LabSolutions主项目] 窗口的 [管理工具] 内双击 （日志浏览器）。

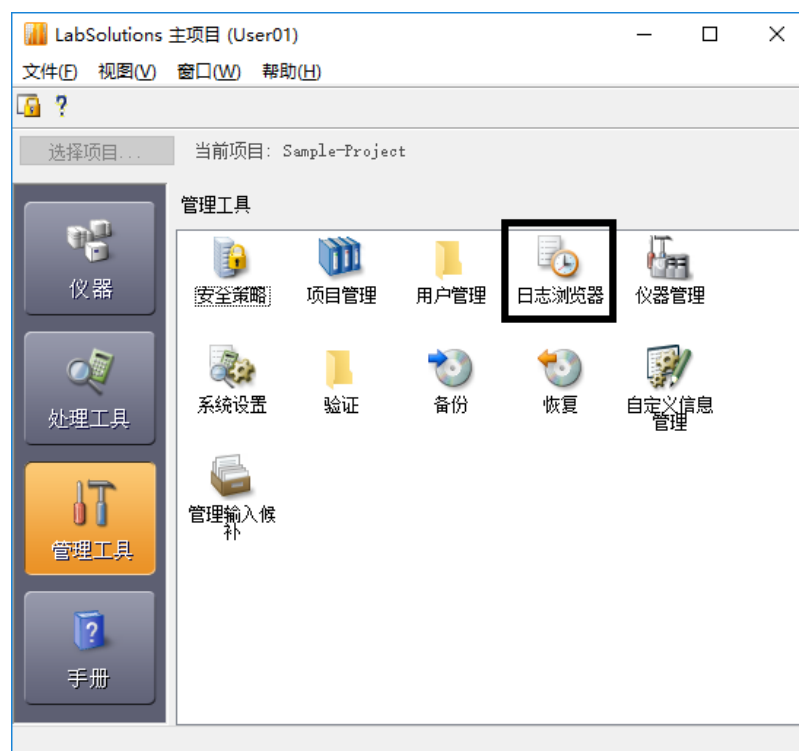

2

设置筛选条件后，单击 [开始]。

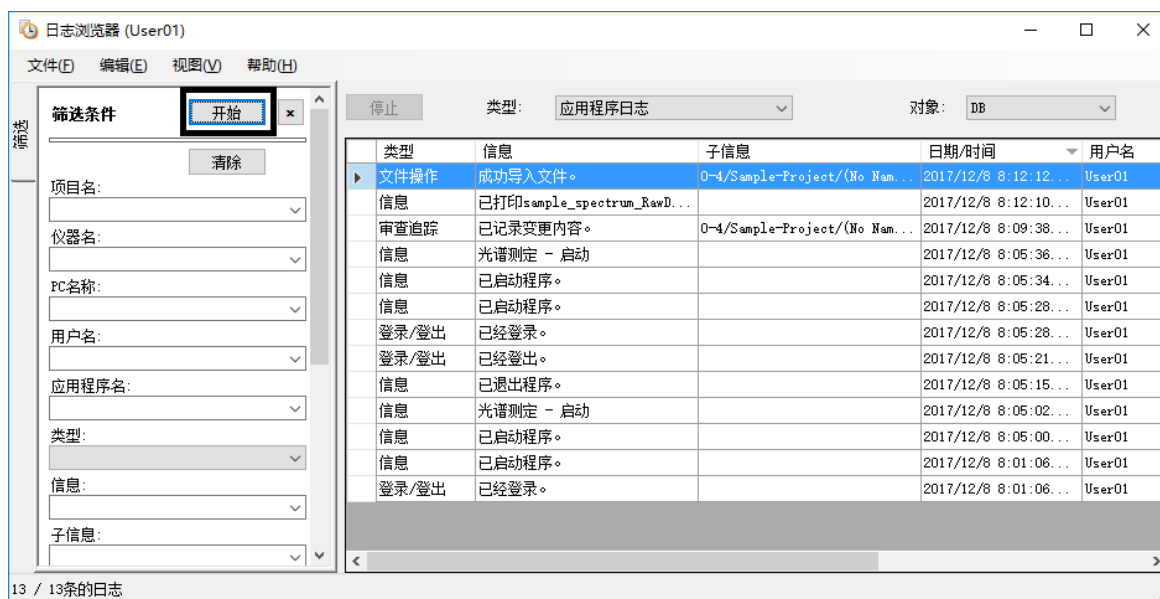

3

双击审查追踪日志的对应行。

停止

类型:

应用程序日志

对象:

DB

	类型	信息	子信息	日期/时间	用户名
	文件操作	成功导入文件。	0-4/Sample-Project/(No Nam...	2017/12/8 8:12:12...	User01
	信息	已打印sample spectrum RawD...		2017/12/8 8:12:10...	User01
▶	审查追踪	已记录变更内容。	0-4/Sample-Project/(No Nam...	2017/12/8 8:09:38...	User01
	信息	光谱测定 - 启动		2017/12/8 8:05:36...	User01

显示 [审查追踪日志] 窗口。

审查追踪日志 - 版本(2)

更改处	内容
RawData	峰检测 - 阈值:0.001000 点数:4
RawData	峰检测 - 阈值:0.010000 点数:4

更改理由

理由:Peak Pick set

关闭帮助

1.2 设置数值舍入方法和显示位数


▶▶ 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“1.2.8 设置数值舍入方法和显示位数”。

在[设置数据处理]窗口中，可以批量设置本软件[数据管理器]所处理数值的舍入方法及显示位数。

▼ 注释 因为将更改系统设置，所以请使用拥有[系统管理]权限的用户ID登录。


1

在[LabSolutions主项目]窗口的[管理工具]双击 （系统设置）。

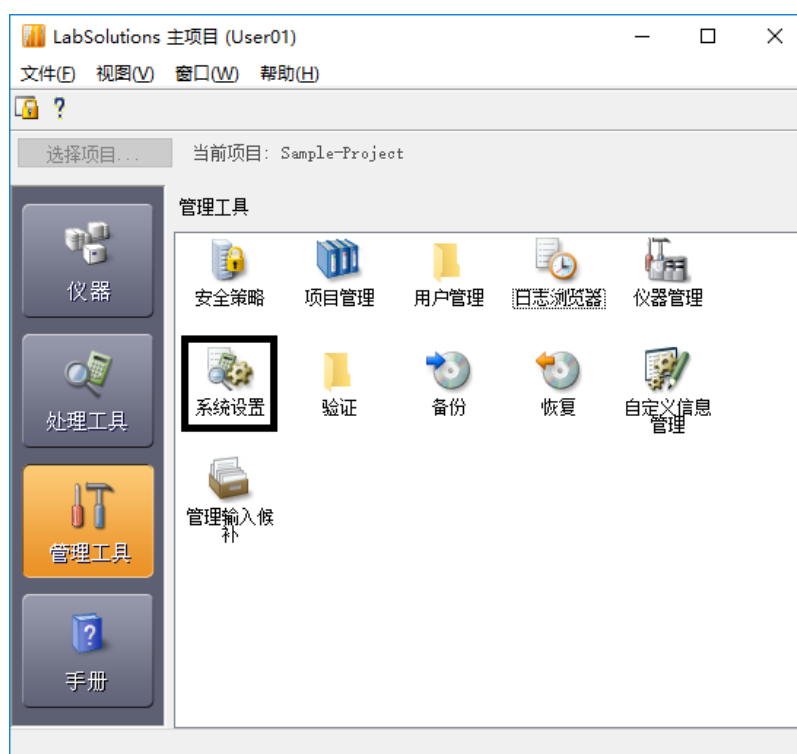

2

单击 [数据处理设置] 。

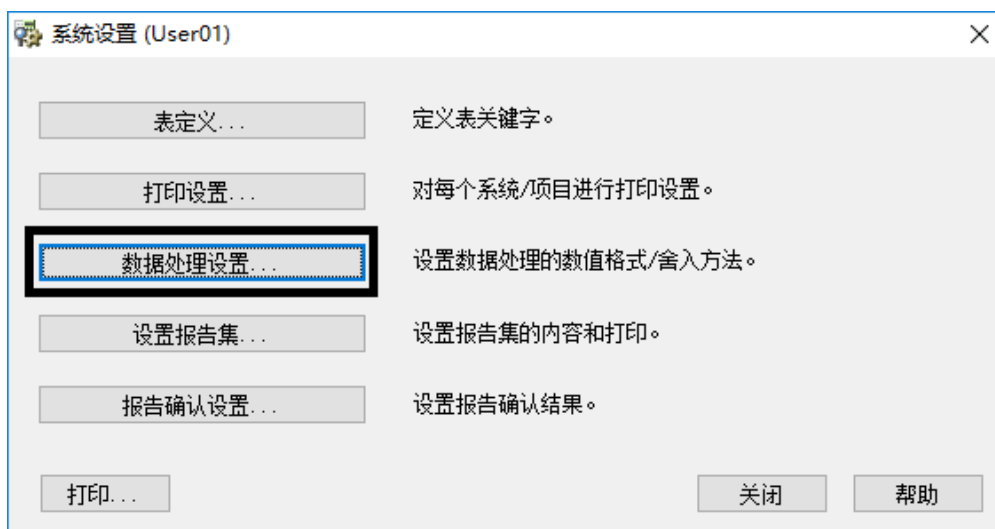


1

3

设置计算结果的舍入方法和显示位数，单击 [确定]。

在下例中，[光度：计算结果] 的显示格式将设置为3位小数（舍入小数点后第4位的数值）。

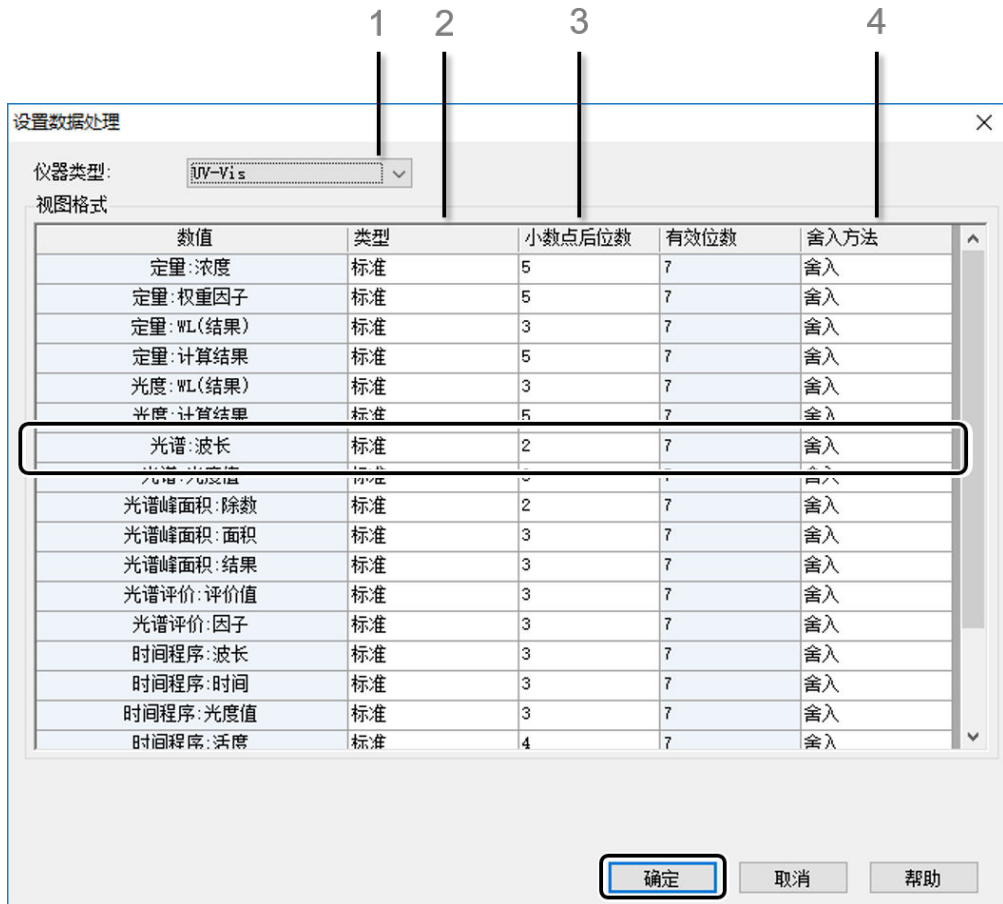

- 1 显示仪器类型。
- 2 在 [光度：计算结果] 行的 [类型] 列表中单击 [标准]。
- 3 在 [光度：计算结果] 行的 [小数点后位数] 中输入“3”。
- 4 在 [光度：计算结果] 行的 [舍入方法] 列表中单击 [舍入]。

■ 注释 在 [类型] 中选择 [标准] 或 [指数] 时，应在 [小数点后位数] 中输入小数点以后的位数；选择 [显示有效位] 时，应在 [有效位数] 中输入位数。

1.3 系统管理

▶▶ 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“1.3.2 锁定窗口后保护分析操作”。

1

1.3.1 通过锁定窗口功能保护系统


为防止计算机在无人值守的情况下发生意外事故或遭受恶意操作，可锁定本软件窗口。

锁定功能生效后，窗口将最小化至任务栏。重新启动窗口时，将打开 [取消窗口锁定] 窗口，要求输入用户ID和密码。

下面以光谱测定窗口内的窗口锁定操作为例进行说明。

1

单击 [窗口] 菜单的 [窗口锁定] 。

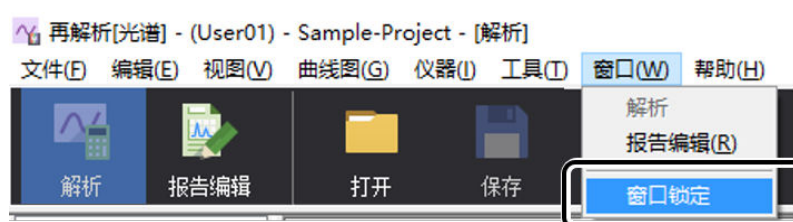

再解析窗口将最小化（在任务栏内最小化）。

2

需再次显示窗口时，单击任务栏的 [光谱] 。

3

输入 [用户ID] 和 [密码] ，单击 [确定] 。



▼ 注释 仅允许由设置窗口锁定的用户解除锁定。

2

数据管理

本章对数据管理各项功能中的UV-Vis机型专用功能进行说明。

关于其他功能，请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书。

2.1 使用数据管理器进行数据管理

对于LabSolutions所使用的各类文件（数据文件、方法文件、批处理文件、报告格式文件等）的管理数据库，可通过〔数据管理器〕查看数据库信息或筛选必要数据。

同时，因为以保持各文件间的关联性为前提进行管理，所以通过简单操作即可查看以前的历史记录或文件版本。

登录到〔数据管理器〕的LabSolutions UV-Vis文件可分为以下4类：

- 数据
- 方法
- 报告
- 其他

2.1.1 LabSolutions UV-Vis的文件格式

可通过〔数据管理器〕进行管理的LabSolutions UV-Vis文件格式如下所示：

■ 数据

名称	扩展名	内容
光谱	vspd	通过光谱创建的数据文件。 包括光谱（波形）数据、测定参数信息、文件信息（摘要）、数据历史记录、峰检测数据、选点检测数据、面积计算数据。
标准曲线	vqcd	通过定量创建的标准曲线数据文件。 包括标准样品表数据、测定参数*1、标准曲线参数、文件信息（摘要）、数据历史记录。
定量	vqud	通过定量创建的定量结果数据。 包括标准样品/样品表数据、测定参数*1、标准曲线参数、文件信息（摘要）、数据历史记录。
光度测定	vphd	通过光度测定创建的测定结果数据。 包括样品表数据、测定参数*1、文件信息（摘要）、数据历史记录。
时间程序	vtmd	通过时间程序创建的光度值的时间变化数据。 包括时间程序（波形）数据、测定参数信息、文件信息（摘要）、数据历史记录。
评价	vsed	保存有根据光谱数据求得的评价值及合格与否的数据文件。

*1 加载数据文件的同时设置为应用程序的测定参数。

■ 方法

使用UV-Vis机型测定时，会将设置时使用的测定参数文件和光谱的评价模板文件分类。

名称	扩展名	内容
光谱参数	vspm	保存光谱测定参数的基本设置、附件、重复测定、高级设置和后处理的文件。
定量参数	vqum	保存定量测定参数的登录波长、标准曲线、仪器、标准样品、未知样品和附件的文件。
光度测定参数	vphm	保存光度测定参数的基本设置、登录波长、计算公式、仪器、未知样品和附件的文件。
时间程序参数	vtmm	保存时间程序测定参数的基本设置、重复测定、高级设置和后处理的文件。
评价模板	vset	光谱评价用模板文件。

■ 报告

名称	扩展名	内容
报告文件	vrpt	包含打印对象的打印模板文件。

■ 其他

名称	扩展名	内容
面积计算 模板	vsat	面积计算表专用模板文件，包含光谱面积计算时使用的波长范围和系数。
选点检测 模板	vspt	选点检测表专用模板文件，包含光谱选点检测时使用的波长。
定量 模板	vqut	定量测定专用文件，包含空白标准样品表信息和空白样品表信息、测定参数和标准曲线参数。
光度测定 模板	vpht	光度测定专用文件，包含空白样品表信息和测定参数。
分析设置文件	vasm	自动分析程序的设置文件。保存有使用自动进样器进行自动分析的设置文件。

2.1.2 UVProbe的文件格式

〔数据管理器〕中管理的UVProbe的光谱数据、测定方法、处理模板可用LabSolutions UV-Vis加载。

 **提示** UVProbe是岛津紫外分光光度计专用的控制和数据处理软件。

■ 数据

通过〔文件〕菜单的〔打开〕/〔UVProbe数据〕加载。

 **提示** 加载后，将自动转换为LabSolutions UV-Vis用的数据文件格式（扩展名vspd）。

名称	扩展名	内容
UVProbe光谱文件	spc	用UVProbe软件创建的光谱数据。可用UVProbe创建（导出功能）的文件格式。 包括光谱（波形）数据、数据处理结果、测定参数信息、文件信息（摘要）、数据历史记录。
UVPC光谱文件	spc	UVPC软件的数据文件。
UV-1800光谱数据文件	spc	UV-1800（单机）获取的数据文件。
UV-1900光谱数据文件	spc	UV-1900（单机）获取的数据文件。

■ 方法

通过〔文件〕菜单的〔打开〕/〔UVProbe参数〕加载。

 **提示** 加载后，将自动转换为LabSolutions UV-Vis用的数据文件格式（扩展名vspm）。

 **注释** 加载的内容仅为测定参数信息。

名称	扩展名	内容
UVProbe光谱测定方法	smd	用UVProbe软件创建的光谱的测定方法文件。

■ 其他

通过〔文件〕菜单的〔打开〕/〔UVProbe模板〕加载。

 **提示** 加载后，将执行选点检测、峰面积计算。

名称	扩展名	内容
UVProbe选点检测模板	spt	用UVProbe软件创建的光谱的选点检测模板文件。
UVProbe峰面积计算模板	spa	用UVProbe软件创建的光谱的峰面积计算模板文件。

2.2 数据管理器的其他功能

2.2.1 将计算机内的本地文件导入数据库

▶▶ 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“2.2.1 导入PC中的本地文件到数据库”。

LabSolutions的[数据管理器]支持将计算机本地文件夹内保存的测定参数文件或报告文件等数据登录数据库。

■ 注释 虽然可以导入数据文件，但无法通过数据管理器的导入功能提取数据信息。请使用LabSolutions UV-Vis再解析程序的导入功能（[文件]菜单的[导入]），在数据库内登录数据文件。

2.2.2 操作数据集或结果文件

▶▶ 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“2.2 管理器的其他功能”和“2.2.3 操作数据集或结果文件”的“将与分析结果相关的文件登录为结果文件”。

■ 将与分析结果（数据文件）相关的文件登录为结果文件

仅限文件类型选择[数据]时，可将[样品信息视图]内当前显示行（样品信息）的关联文件登录数据库。

■ 注释

- 登录文件时需使用拥有[文件登录]权限的用户ID登录。
- 虽然[数据管理器]支持直接查看备份数据库的内容，但备份数据库为只读状态，无法登录文件。

2.2.3 连接登录数据的文件类型与程序

▶▶ 参考 详细内容请参考LabSolutions Manager CS或LabSolutions Manager DB的管理说明书“2.2 管理器的其他功能”和“2.2.5 连接登录数据的文件类型与程序”。

[数据管理器] 可将样品信息行内的相关文件与执行显示、打印的程序建立连接。

初始状态下设置的连接如下所示：

文件类型	扩展名	程序
光谱文件	vspd	UVnavi.exe（再解析 [光谱]）
标准曲线文件	vqcd	UVnavi.exe（再解析 [定量]）
定量文件	vqud	UVnavi.exe（再解析 [定量]）
光度测定文件	vphd	UVnavi.exe（再解析 [光度测定]）
时间程序文件	vtmd	UVnavi.exe（再解析 [时间程序]）
光谱参数文件	vspm	UVVisParamViewer.exe（测定参数阅览工具）
定量参数文件	vqum	UVVisParamViewer.exe（测定参数阅览工具）
光度测定参数文件	vphm	UVVisParamViewer.exe（测定参数阅览工具）
时间程序参数文件	vtmm	UVVisParamViewer.exe（测定参数阅览工具）

3

历史记录管理

本章对LabSolutions UV-Vis所创建的数据历史记录、测定参数的更改历史记录和仪器历史记录
的查看操作进行说明。

3.1 创建历史记录

LabSolutions UV-Vis支持创建以下历史记录：

名称	内容
数据历史记录	记录生成数据后至现在所执行的数据处理等内容。
测定参数的更改历史记录	记录测定参数文件从生成至当前的更改内容。
系统日志	记录所连UV-Vis仪器的初始化结果信息及状态、开始和停止测定等 内容。

与测定参数信息及数据处理结果相同，数据记录也将存入数据文件内。

可在LabSolutions UV-Vis的各应用程序的测定模式下获得和保存日志。并且，与系统管理的历
史记录信息相同，也可以使用日志浏览器查看日志。

▶▶ 参考 关于使用日志浏览器查看历史记录信息的操作方法，请参考LabSolutions Manager CS或
LabSolutions Manager DB的管理说明书“1.4.1 在日志浏览器确认记录信息”。

此类记录生成功能始终处于运行状态。


如果激活（勾选）仪器策略的〔保存文件时输入理由〕，对于尚未保存的数据文件或测定参数
文件，执行保存时需针对更改内容输入理由。

▶▶ 参考 关于更改理由的输入方法，请参考“1.1.3 审查追踪日志”P.7。


3.2 查看数据历史记录

使用LabSolutions UV-Vis的测定程序，查看数据文件内保存的数据历史记录。
下面以光谱文件数据历史记录的查看方法为例进行说明。


1 单击曲线图视图的〔激活〕标签。

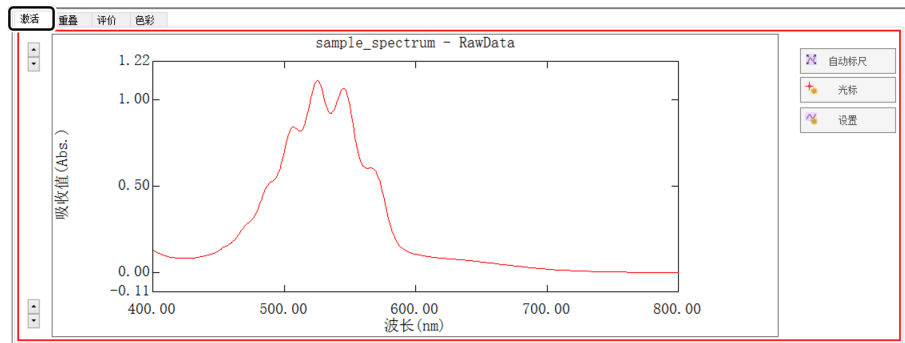

2 在树形视图上双击需查看历史记录的数据集。

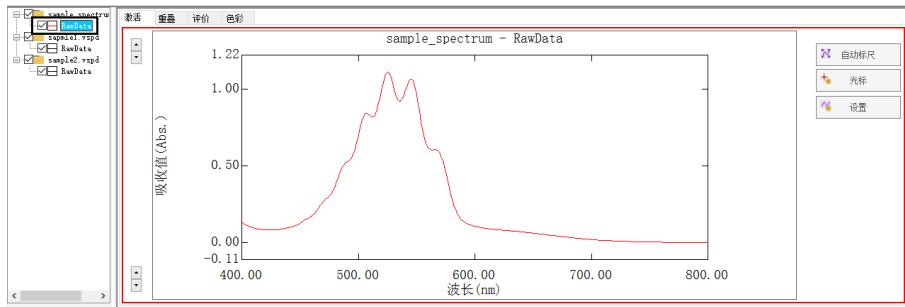

3 单击数据视图的〔历史记录〕标签。
数据视图内将显示激活数据集的数据记录。

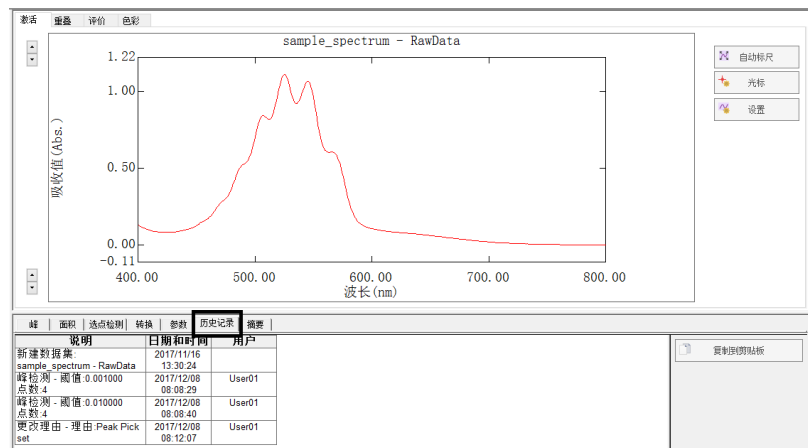

3.3 查看测定参数的更改历史记录

3.3.1 加载的测定参数文件的更改历史记录

使用LabSolutions UV-Vis的测定程序查看加载的测定参数文件的更改历史记录。
下面以光谱文件数据历史记录的查看方法为例进行说明。

1

打开测定参数文件（本例中已打开“SpcParam01.vspm”）。



2

单击仪器控制窗口的 [确认] 。



显示“SpcParam01.vspm”文件的更改历史记录。

3

单击 [参数] 窗口的 [历史记录] 标签。

单击窗口上层的历史记录行（显示更改日期和时间及更改时的用户名）后，将在中层显示更改内容，在下层显示更改理由。

 **提示** 仅限已激活仪器策略的“保存文件时输入理由”时可输入更改理由。

▶▶ **参考** 关于仪器策略，请参考“1.1 设置UV-Vis机型的仪器策略”P.1。

参数 - UV-2600 系列

参数 **历史记录**

版本	日期和时间	用户名
2	2017/12/08 08:3...	User01
1	2017/12/08 08:2...	User01

更改处	内容
[测定 - 波长范围]	800~400 -> 1000~400
[高级设置 - 狭缝宽度]	2.0 -> 5.0

更改理由

理由: Sample2 Mode

打印 关闭

3.3.2 项目内测定参数文件的更改历史记录

使用数据管理器查看项目内测定参数的更改历史记录。

1

[LabSolutions主项目] 窗口的 [处理工具] 内双击  (数据管理器)。


2

将数据管理器的文件类型指定为“方法”。




3

在需查看的测定参数行右击后，单击右键菜单的 [从应用程序打开]。

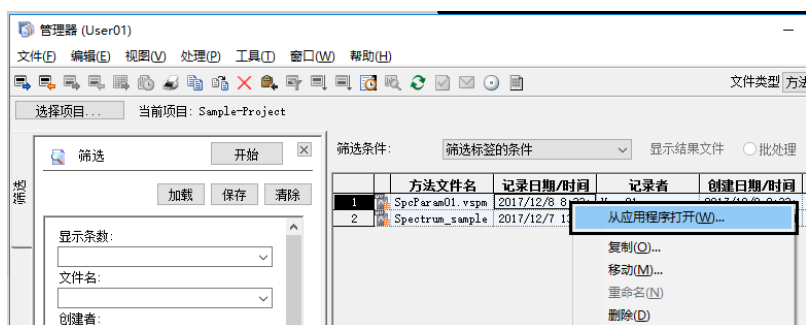


启动测定参数查看工具。

显示所选测定参数的内容和更改历史记录。

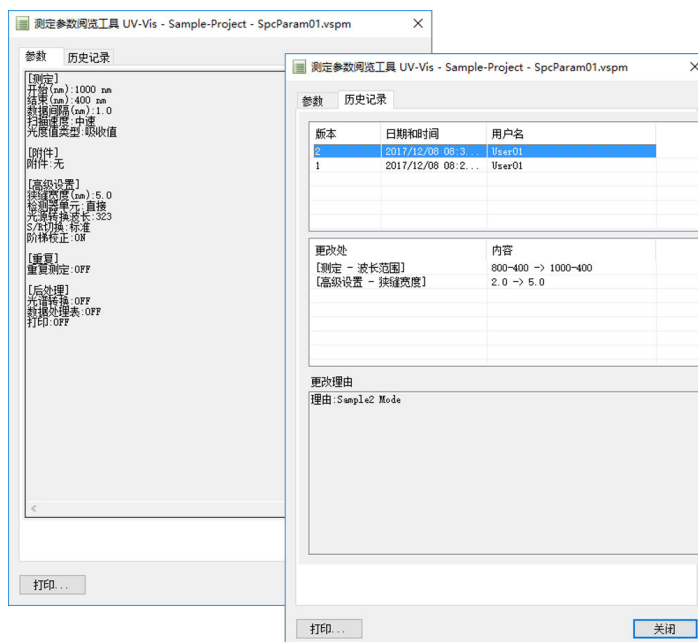

3.4 查看系统日志

可在测定程序窗口的日志视图内查看应用程序启动时生成的UV-Vis仪器初始化结果信息及状态、开始和停止测定等信息。

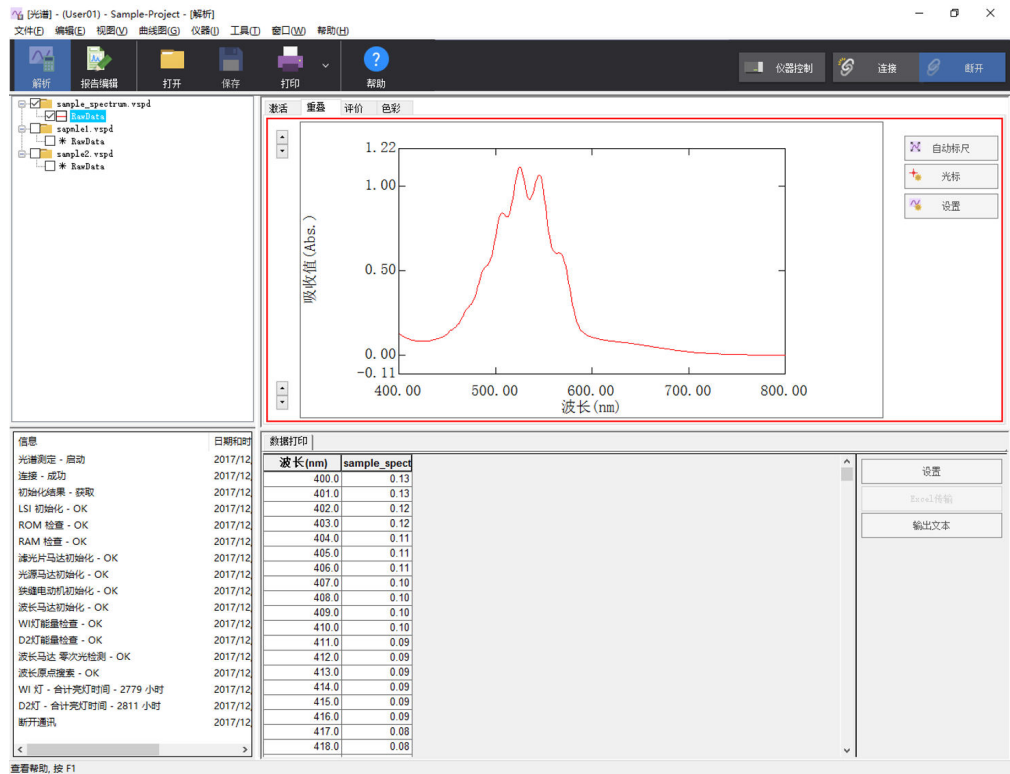

“光谱”测定模式窗口的日志视图

下面对系统日志的查看操作进行说明。

1

单击LabSolutions UV-Vis启动窗口的〔系统配置〕。



2

单击 [确认日志]。




显示 [显示系统日志] 窗口。



提示

如果系统日志超过设置的容量（文件大小），将自动更改文件。

如果要确认比此处显示的系统日志更早的日志，应单击画面上部的 [浏览] 按钮，打开对象日志文件。

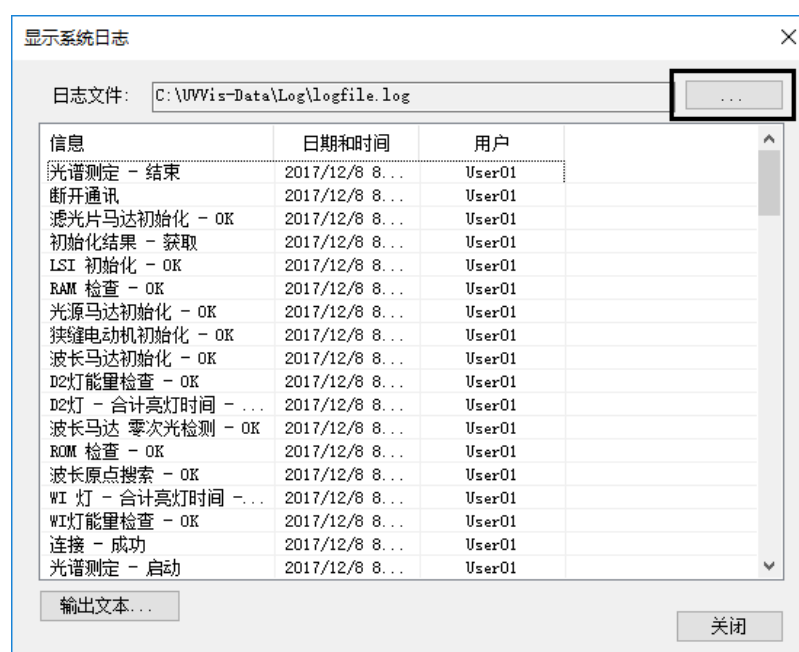

空白页